



H₂-O₂

Návod na použitie

Úvod

V prvom rade nám dovoľte vyjadriť srdečné poďakovanie zákazníkom, ktorí si zakúpili zariadenia našej spoločnosti. Tento návod je napísaný pre zákazníka, aby mohol tento nástroj lepšie využívať. Dúfam, že produkty a služby spoločnosti vám prinesú službu na požadovanej úrovni.

Všimnite si

Tento produkt je nutné používať v prísnom súlade so spôsobom použitia uvedeným v tomto návode, ak ho nedodržíte, všetky následky budete znášať na vlastnú zodpovednosť, vtedy spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku akéhokoľvek druhu, vrátane (okrem iného) implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby obsiahnuté v tomto návode ani za náhodné, či následné škody v súvislosti s poskytnutím, výkonom alebo použitím tohto návodu.

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené patentovými zákonmi. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu sa nesmie kopírovať alebo prekladať do iného jazyka bez písomného súhlasu spoločnosti.

Obsah príručky sa môže zmeniť bez upozornenia používateľa.

Zodpovednosť výrobcu

Spoločnosť je zodpovedná za bezpečnosť a spoľahlivosť prístroja iba v nasledujúcich prípadoch: montáž, opätovné nastavenie, vylepšenie a údržba sú vykonávané personálom uznaným spoločnosťou, príslušné elektrické zariadenia sú v súlade s národnými normami a zariadenie sa používa podľa návodu.



Upozornenie

Toto je kozmetický prístroj. Ak kozmetická inštitúcia, ktorá nesie zodpovednosť za používanie tohto nástroja, nedosiahne uspokojivý súbor prevádzkových postupov, môže to spôsobiť abnormálne zlyhanie prístroja a môže to byť nebezpečné pre ľudské zdravie. V súčasnosti naša spoločnosť na požiadanie používateľa za poplatok poskytne schému zapojenia so samostatným zoznamom metód kalibrácie a ďalšími informáciami, ktoré používateľovi pomôžu pri opravách častí prístroja, ktoré naša spoločnosť klasifikuje ako používateľsky opraviteľné kvalifikovanými technikmi.

Záruka

Výrobný proces a suroviny: Spoločnosť garantuje, že u prístroja (okrem dielov) pri normálnom stave používania a údržby počas jedného roka od dátumu odoslania nedôjde k poruche z dôvodu vady z výrobného procesu a surovín.

V tomto návode na použitie

Táto používateľská príručka obsahuje všetky všeobecné informácie o tomto nástroji. Toto je východiskový bod pre nových používateľov, ako začať s prístrojom, pretože poskytuje všeobecný úvod do systému, vysvetľuje, ako funguje, popisuje inštaláciu prístroja a rôzne spôsoby prevádzky. Prostredníctvom registra nájdete informácie, ktoré potrebujete. Táto príručka má za úlohu oznámiť vás s týmto prístrojom a nechať ho prečítať obsluhujúci personál so skúsenosťami s používaním kozmetických prístrojov.

Používajte ho, prosím, bezpečne

V prístroji a v príručke sa používajú nasledujúce symboly. Aby ste mohli prístroj správne používať, aby ste predišli zraneniu operátora a pacienta, aby ste ochránili prístroj pred poškodením, aby ste predišli škodám na majetku, venujte prosím pozornosť typu a významu nasledujúcich symbolov.

	Upozornenie	Označuje, že v dôsledku prevádzkových chýb môže dôjsť k úmrtiam a vážnym zraneniam		Značka označuje povinné položky
	Nebezpečenstvo	Označuje, že v dôsledku prevádzkových chýb sa môžu vyskytnúť úmrtia a vážne zranenia		Značka znamená, že projekt je zakázaný
	Všimnite si	Označuje, že v dôsledku nesprávnej prevádzky môže dôjsť k zraneniu personálu a poruche prístroja		Značka označuje predmet pozornosti
	Všimnite si	Skontrolujte prosím návod		Označuje, že typ ochrany, ku ktorému zariadenie patrí, je typ B
	Pripomienka	Pripomínajúce upozornenie, zdôrazňujúce dôležité informácie		

1. Záležitosti vyžadujúce upozornenie

1.1 Preventívne opatrenia pri používaní miest



Upozornenie

- 1) Nepoužívajte rozvodky, aby ste predišli požiaru;
- 2) Pri výmene poistky musí byť vypnutý hlavný vypínač, aby sa predišlo požiaru, úrazu elektrickým prúdom;
- 3) Musí sa používať napájanie 220 V \pm 22 V, 50 Hz \pm 1 Hz a zásuvka s uzemnením
- 4) Pri použití poškodeného alebo opotrebovaného napájacieho kábla hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom;
- 5) Napájací kábel príliš neohýbajte, neskrúčajte, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom;
- 6) Ak je nástroj uvoľnený alebo poškodený, včas kontaktujte spoločnosť;
- 7) Nepoužívajte prístroj v nestabilnom prostredí, ako je naklonenie, vibrácie, nárazy;
- 8) Do vnútra prístroja sa nemôže dostať voda alebo nečistoty, v prípade cudzieho telesa kontaktujte spoločnosť;
- 9) pri premiestňovaní prístroja musí byť odpojená sieťová zástrčka
- 10) Prístroj by sa mal premiestniť, aby sa predišlo vibráciám;
- 11) Prístroj by mal byť umiestnený na stabilnom mieste, mal by sa pod ním ponechať priestor aspoň 5 cm, aby sa zabezpečila cirkulácia vzduchu, ktorá napomáha k odvádzaniu tepla vyžarovaného z prístroja ;
- 12) Prístroj sa nemôže ničím zakryť, aby sa zabránilo zablokovaniu vetracích otvorov;
- 13) Vyhnite sa používaniu prístroja v nasledujúcom prostredí: vystavenie snežnému žiareniu; prostredie s vysokou vlhkosťou; prostredie v blízkosti vody; vibrácie, naklonené miesta; prostredie silného magnetického poľa; elektromagnetická vlna, miesto nárazového napätia; sklad chemikálií, miesta s korozívnymi plynmi;
- 14) Tento prístroj nesmie byť umiestnený v blízkosti rádii, televízorov, kopírokov, faxov atď.;
- 15) Nemožno používať spolu s inými prístrojmi (ako sú mikrovlny), aby sa predišlo vzájomnému rušeniu medzi prístrojmi, čo by spôsobilo nesprávnu činnosť.

1.2 Informácie Pred Použitím



Upozornenie

- 1) Pred zapnutím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Obsluha musí byť oboznámená s návodom na obsluhu a spôsobmi obsluhy, zariadenie musí obsluhovať jedna osoba;
- 2) Nastavte prevádzkové parametre pod vedením odborníkov na nastavenie;



Všimnite si

- 3) Pred použitím skontrolujte, či je prístroj v normalnej prevádzke;
- 4) Skontrolujte, či je pripojenie uzemňovacieho vodiča správne;
- 5) Uistite sa, že všetky vodiče sú pripojené a bezpečné;
- 6) Ak sa používa v spojení s prístrojom, musí sa používať správne, inak môže byť nebezpečný a musíte byť veľmi opatrný.

1.3 Bezpečnostné opatrenia pri používaní



Upozornenie

- 1) Ak prístroj alebo pacient počas prevádzky nie je v poriadku, operátor okamžite odovzdá operačnú rukoväť pacientovi, stlačí vypínač a zastaví používanie prístroja.



Všimnite si


- 2) Počas prevádzky prístroja je potrebné neustále sledovať situáciu hosta na kozmetickom zákroku a prístroja a sledovať, či nenastane nejaká abnormálna situácia;
- 3) Ponechajte, prosím, správne používanie prístroja skúseným operátorom, prístroj by nemal používať iný personál ako prevádzkový technik.

1.4 Bezpečnostné opatrenia po použití

 Všímňte si

- 1) Po prevádzke sa ovládací páka vráti do stojana ovládacej páky.
- 2) Ovládaciu rukoväť treba po použití sondy vyčistiť, aby bola pripravená na ďalšie použitie

1.5 Porucha, skladovanie, kontrolné opatrenia


 Upozornenie

- 1) Prístroj nepoužívajte, ak nefunguje správne. V prípade zápachu dymu nie je možné prístroj ďalej prevádzkovať, ak ho budete naďalej používať, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Rýchlo stlačte tlačidlo zastavenia, vypnite napájanie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a okamžite kontaktujte spoločnosť alebo distribútora;
- 2) ak to nie je technik. Prístroj sa absolútne nedá opraviť a znovu použiť. Prístroj sa nesmie rozoberať

 Všímňte si





- 3) Pravidelne, prosím, kontrolujte nástroje a komponenty
- 4) Nepoužívajte čistiace nástroje, ktoré poškodzujú ochranný povlak nástroja, ako sú kefy a metly;
- 5) Ak sa nástroj nepoužíva dlhšie ako 2 týždne, musí sa pred ďalším použitím dôkladne skontrolovať.

1.6 Upozornenie a rýchle pokyny

 Upozornenie

Keď sú vysokofrekvenčné zariadenie a tento nástroj pripojené k tomu istému pacientovi súčasne, poloha elektródy nástroja môže spôsobiť popáleniny kožného tkaniva pacienta a nástroj sa môže ľahko poškodiť. Pri používaní prístroja v blízkosti vysokofrekvenčného alebo mikrovlnného zariadenia (1 m) nemusí byť výstup prístroja stabilný v dôsledku mikrovlnného rušenia. Použitie elektród v blízkosti hrudníka zvyšuje riziko fibrilácie srdca.

2. Kontraindikácie

-  1, Citlivá pleť, silné akné
-  2, Zariadenie na srdcový rytmus, implantovateľný srdcový defibrilátor alebo iné elektromagnetické implantovateľné zdravotnícke zariadenie
-  3, Ťažká cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol
-  4, Chorý človek s kožnou nákazou

3. Úvod



4.1 Otvorte balík a skontrolujte

4.1.1 vyberte prístroj a všetky diely z obalu, buďte prosím opatrný a potom dobre uschovajte kartóny a penu, v prípade, že ich použijete na prepravu, skontrolujte všetky diely podľa zoznamu dielov.

4.1.2 skontrolujte prístroj, či nie je poškodený, ak je s ním nejaký problém,

⚠ Všímnite si

Kontaktujte, prosím, obchodné oddelenie našej spoločnosti alebo zástupcu.

4.2 prístroj umiestnite do miestnosti, ktorá je čistá a vetraná, jej teplota je asi 5 °C~40 °C, vlhkosť nemôže prekročiť 80%.

Uistite sa, že je vetrací otvor otvorený, priestor okolo prístroja musí byť aspoň 5 cm. a uistite sa, že na prístroji nie sú žiadne veci, ani len dočasne.

4.3 Podľa informácií v textoch a obrázkoch pod výstupnými rozhraniami na oboch stranách prístrojov sú na hlavných rámoch nainštalované príslušné úchytky.

4.4 Popis zariadenia na zadnej strane prístroja



Sieťová zásuvka poistkový drôt sieťový vypínač

⚠ Všímňte si


- Pred odstránením nástrojov zlikvidujte roztoky vo fľašiach A, B, C, D a fľaštičky s odpadovým roztokom. V opačnom prípade sa prístroj poškodí, ak sa do neho počas pohybu dostanú roztoky.

⚠ Všímňte si

Ak pri používaní v praxi prístroj vydáva bzučanie, sledujte indikátor na nádobe s odpadovým roztokom. Ak bliká, vylejte odpadový roztok do fľaše a znova nainštalujte fľašu s odpadovým roztokom.

5. Tlačidlá pracovného času a nastavenia

5.1 Využitie obrusovania vodou

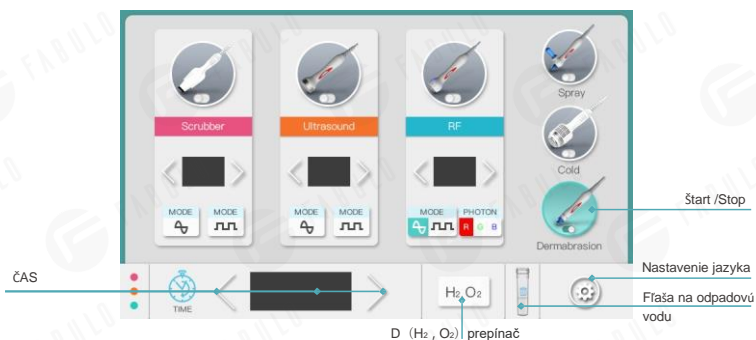


5.1.1 : Čistenie tváre

5.1.2 : Podľa tváre zákazníka vyberte vhodný hrot, gombíkom vyberte správnu fľašu produktu: ABC alebo D

5.1.3 : Zvoľte vákuum, prietok vody, spustíte prístroj a začnete čistenie tváre.

⚠ Všímajte si


Kliknite na H₂O₂ na obrazovke a počkajte 3 minúty pred použitím fľaše D. H₂O₂ Musí produkovať H₂O₂.

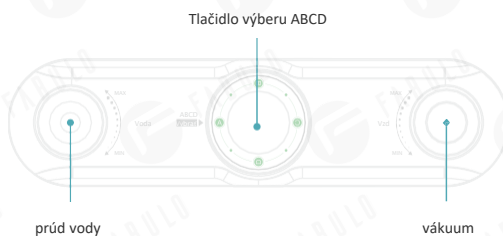

⚠ Všímajte si

Po dokončení produktu vo fľašiach vyčistite fľaše ABCD a potrubiie, aby ste predišli upchatiu.

5.2: využitie vodného kyslíka

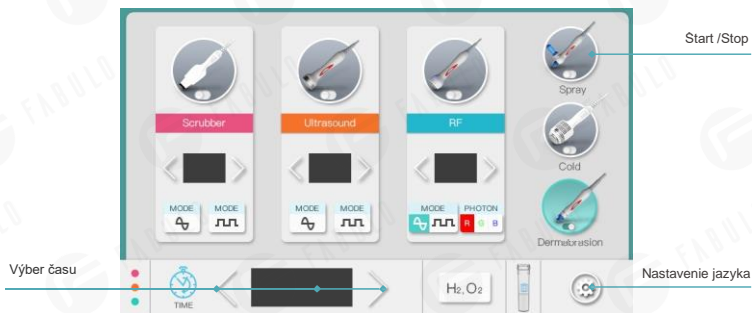

5.2.1 Ovládacie časti počas čistenia;

5.2.2 Nalejte zriedenú esenciu do nádrže na striekacej pištoľ.


5.2.3 Kliknite na tlačidlo striekacej pištoľe na obrazovke;

5.2.4 Striekacia pištoľ namieri na pozíciu a začne pracovať.

5.2.3 Použitie chladu a tepla znečitlivujúcej rukoväte

⚠ Ak je dýza zablokovaná, použite rozprašovací rukoväť na vybratie ihly z dýzy, aby ste odstránili nečistoty.

5.3 : Použitie studenej rukoväte

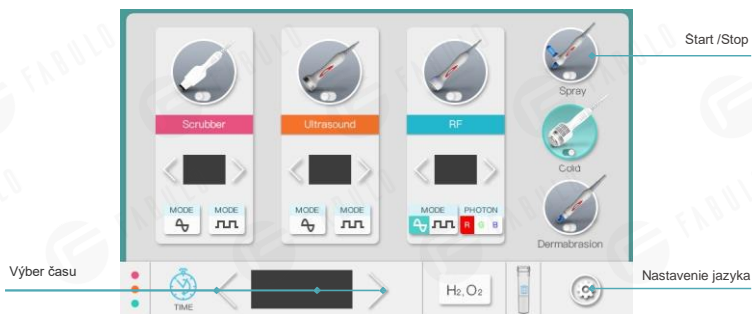


5.3.1 : Čistenie tváre

5.3.2 : Kliknite štart

5.3.3 : Dotknite sa pokožky zákazníka a spustíte prevádzku

5.4 : Použitie RF

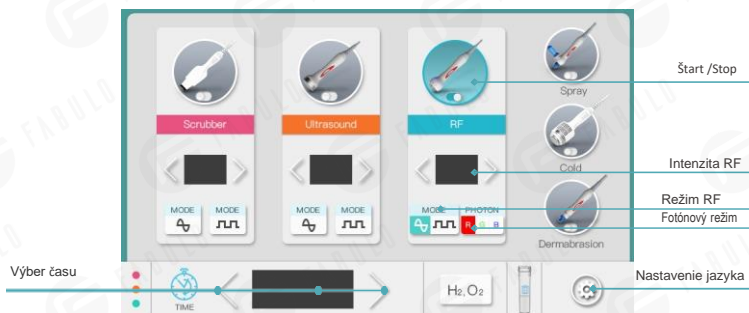

5.4.1 : čistenie tváre


5.4.2 : Použite gél na mieste operácie

5.4.3 : Zvoľte vhodný pracovný čas, intenzitu a režim

5.4.4 : Kliknite na štart a spustíte operáciu

5.4.5 : V závislosti od línií tváre sa každá línia zdvihne nahor alebo sa každá línia stočí nahor

5.5: Použitie ultrazvuku

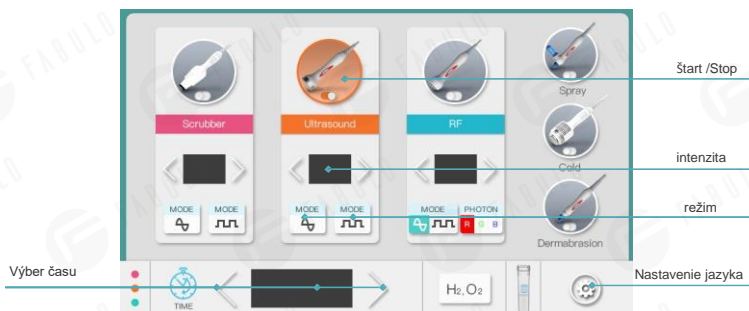

5.5.1 : čistenie tváre


5.5.2 : Použite produkt na mieste operácie

5.5.3 : Zvoľte vhodný pracovný čas, intenzitu a režim

5.5.4 : Kliknite na štart a spustíte operáciu

5.5.5 : Krúžte pomaly nahor pozdĺž obrysových čiar 5-8min

5.6 : Použitie skrubera

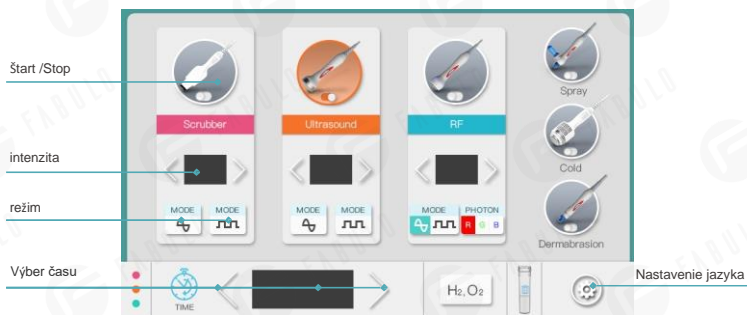


5.6.1 : Spôsob čistenia: Odstráňte nečistoty

- A : Očistite tvár
- B : Držte náplast' na oboch stranách.
- C : Naneste dostatočné množstvo vody na pokožku.
- D : Rukoväť naklonená 45° zdola nahor. Ako na obrázku 1
- E : čas prevádzky :20min

5.6.2 : Nábeh : Lymfatická masáž

- A : Očistite tvár
- B : Držte náplast' na oboch stranách.
- C : Naneste dostatočné množstvo produktu na pokožku.
- D : Pritlačte pevne proti pokožke a posúvajte smerom k svalovej štruktúre. Ako na obrázku 2

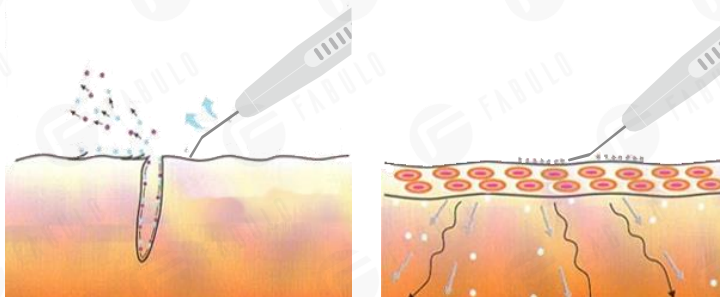

6. Veci, na ktoré si treba dávať pozor

Všimnite si

- 6.1 Po ošetrení do 24 hodín nepoužívajte dráždivú kozmetiku, kozmetiku a dávajte pozor na opaľovací krém
- 6.2 Nepretržite používajte hydratačnú masku po dobu 1 týždňa.
- 6.3 Evigačné pero nesmú používať ľudia, ktorí majú tenkú kožičku alebo veľa červenej krvi na lícných kostiach.
- 6.4 Keď funguje RF video, ľuďom, ktorí majú tenkú kožičku alebo veľa červenej krvi na lícných kostiach, by to nemalo trvať príliš dlho.
- 6.5 Ľudia s ťažkou anafylaxiou alebo ťažkým akné s tým pracovať nemôžu.

Upozornenie

Ak sa pacienti necítia dobre, zastavte prístroj stlačením ručného ovládača, aby ste zaistili bezpečnosť.

7. Udržiavanie v dobrom stave a údržba

7.1 Udržiavanie v dobrom stave

7.1.1 Denná kontrola

Manažér musí skontrolovať prístroje a montážne jednotky.

- a) Ak zásuvka nemá uzemnenie, vymeňte zásuvku.
- b) Elektrické vodiče sú deformované, prasknuté alebo odpojené voľným okom. Ak je to tak, môže to viesť k požiarnej katastrofe. Ihneď vymeňte elektrický vodič za nový.
- c) Ovládací rukoväť nie je v poriadku, alebo je zlomená - viditeľné voľným okom, či sú výstupné vodiče poškodené alebo deformované, ak sú, okamžite ich vymeňte.
- d) Pred použitím prístroja skontrolujte, či je nápoveda správna. Ak je nápoveda nesprávna, prestaňte ho používať.

7.1.2 Čistenie

Keď je nástroj vyčistený, prach sa musí utrieť suchou a mäkkou handričkou a šmuhy sa utru mäkkou vlhkou handričkou. Pred čistením prístroja musí byť hlavný vypínač vypnutý a elektrické vedenie musí byť prerušené.

7.1.3 Výmena poistky

- a) Špecifikácie poistky napájania 8A (Φ5×20mm)
- b) Pri výmene poistky postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 - 1) Vypnite hlavný vypínač;
 - 2) Odpojte sieťovú zástrčku;
 - 3) Otvorte kryt poistky pomocou skrutkovača.
 - 4) Vyberte poškodenú poistku a vymeňte poistku za novú.
 - 5) Vráťte kryt poistky do pôvodnej polohy;
 - 6) Zapojte sieťovú zástrčku;

Upozornenie

Pri výmene poistky vypnite napájanie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

7.1.4 Prístroj používaný dlhší čas (viac ako jeden rok) by mal byť udržiavaný odborným personálom údržby, aby vyčistil vnútorné škrvny popola.

7.1.5 Prístroj by mal byť umiestnený vo vetranom a suchom mieste a keď sa nepoužíva, prikrytý prachotesným krytom.

7.2 Údržba

- 7.2.1 Po zakúpení prístroja vyplňte záručný list a odošlite ho výrobcovi alebo obchodným zástupcom. Potom bude záruka platná; ak sa vyskytne nejaký problém s kvalitou, na hlavný motor bude poskytnutá bezplatná záruka po dobu jedného roka od dátumu oznámenia vydaného kupujúcim. (Poznámka: Pri údržbe ukážte poznámky a záručný list; záruka je obmedzená na hlavný motor, s výnimkou dielov a iného spotrebného materiálu, ktorý je potrebné pravidelne vymieňať.
- 7.2.2 Po uplynutí záručnej doby sa obráťte priamo na výrobcu, aby vám poskytol pozáručný servis.
- 7.2.3 Ak má byť pokyn zachovaný, kontaktujte náš zákaznícky servis alebo predajcu. Neopravujte prístroj sami. Po otvorení nebude spoločnosť zodpovedať za záruku.

8. Bežné problémy a metódy ich odstránenia

- 8.1 Keď prístroje nefungujú správne, nerozoberajte a neinštalujte ich sami. Mali by ste sa spojiť s oddelením služieb zákazníkom alebo distribútorom spoločnosti, aby ste zistili príčinu problému.
- 8.2 Skôr ako požiadate o servis, skontrolujte prístroj pomocou nasledujúcich tipov a zistíte, či problém nezvládnete sami.

Ako sa porucha prejavuje	Príčina	Metódy eliminácie a riešenie
Po spustení nie je žiadna reakcia	Odpojená napájacia zástrčka; Vypínač je vypnutý; Poistka napájacieho zdroja sa prerušila.	Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do zásuvky alebo nie;
Rukoväť nefunguje správne	Nestačili ste tlačidlo štart Nesprávna inštalácia sondy Poškodená pracovná hlava Nesprávna inštalácia konektorov za prístrojom	Stlačte tlačidlo štart Skontrolujte, či je inštalácia sondy správna Vymeňte pracovnú hlavu alebo silikónovú slučku Prístroj znovu nainštalujte
Únik kvapaliny	Tesniaci krúžok zo silikónovej gumeny je poškodený alebo chýba. Nedodržaný návod na inštaláciu	Vymeňte krúžok zo silikónovej gumeny Vráťte výrobcovi na prepracovanie

9. Zodpovednosť výroby

- 9.1 Produkty by mali vyhovovať produktovej norme. Ak nevyhovujú, naša spoločnosť je zodpovedná za výmenu a vrátenie prístrojov.
- 9.2 Naša spoločnosť zodpovedá za škodu na zdraví a majetku spôsobenú vadami produktov, okrem nasledujúcich prípadov:
- a) Nákupcovia a prevádzkovatelia nepoužívajú výrobky v súlade s pokynmi, bezpečnostnými opatreniami a varovnými pokynmi.
- b) Porušenie ustanovení o preprave, inštalácii, používaní, údržbe, skladovaní a iných ustanovení.
- 9.3 Naša spoločnosť sľubuje doživotnú údržbu a technický servis produktu. Problémy s kvalitou, ktoré sa vyskytnú v dobe stanovenej záruky kvality, budú bezplatne opravené.

10. Výmena dielov.

Pri výmene dielov je potrebné ich zakúpiť u našej spoločnosti.

11. Skladovanie a preprava

- 11.1 Skladovanie: keď je prístroj uskladnený, mal by byť umiestnený v originálnom balení a umiestnený v dobre vetranej čistej miestnosti. Baliaci box by mal byť odolný teplote okolia -10 C až 40 C a relatívnej vlhkosti vzduchu nie vyššej ako 93%. Žiadne škodlivé plyny, horľavé a výbušné materiály a korozívne plyny.
- 11.2 Preprava: Prístroj je v podmienkach balenia vhodný pre diaľnicu, železnicu, letectvo a vodné cesty. V procese manipulácie a prepravy by nemalo dochádzať k silným vibráciám a otasom. Nesmú byť vlhké a nesmú sa miešať s horľavým alebo korozívnym materiálom. Konkrétne požiadavky sú podľa kúpnej zmluvy.

12. Životnosť

- 12.1 Záručná doba na tento nástroj je 1 rok. (Poznámka: okrem poškodenia spôsobeného človekom)
- 12.2 Záručná doba dielov je 3 mesiace. (Poznámka: okrem poškodenia spôsobeného človekom)
- 12.3 Používanie prístroja, ktorý je po životnosti, by mal schváliť technik a technik by mal pravidelne kontrolovať funkčnosť prístroja počas následného používania.
- 12.4 S vyradenými nástrojmi a časťami, ktoré sú po dobe životnosti, by sa malo zaobchádzať v súlade s príslušnými miestnymi predpismi.

Záručný list

Názov modelu:	<input type="text"/>	Číslo položky:	<input type="text"/>
Dátum výroby:	<input type="text"/>	Výrobné číslo:	<input type="text"/>

- 1, Od dátumu, keď si klient zakúpi tento prístroj (doklad o objednávke), ak má prístroj nejaké problémy s kvalitou, ale má dobrý vzhľad do 7 dní, klient môže vymeniť pokazený prístroj za nový. Hostiteľ má dvojnásobnú záruku (okrem zraniteľných častí). Ak je prístroj mimo záručnej doby alebo dátumu záruky, naša továrňa môže prevziať aj údržbu a aktualizáciu pod podmienkou, že klient zaplatí náklady na údržbu. Upozorňujeme, že ak je potrebné prístroj poslať späť do továrne na údržbu, kupujúci aj dodávateľ by si mali dohodnúť obe časti prepravného poplatku. Kupujúci by mal poskytnúť celý prepravný poplatok počas jednoročného nákupu.
- 2, Nasledujúce poruchy spôsobené nesprávnym osobným používaním nie sú zahrnuté v rozsahu záruky:

- ① Prístroj svojvoľne rozeberiete a znova zmontujete;
- ② Porucha pri neopatrnom páde;
- ③ Chyba v nedostatočnej starostlivosti o prístroj;
- ④ Chyba nesprávneho použitia.

Meno klienta :	<input type="text"/>	Dátum nákupu :	<input type="text"/>
Adresa :	<input type="text"/>		
Kontaktné číslo :	<input type="text"/>		

Meno predajcu :	<input type="text"/>	Kontaktné číslo :	<input type="text"/>
Adresa :	<input type="text"/>		
Kontaktné meno ;	<input type="text"/>		

Záznamy o údržbe	Dátum údržby : <input type="text"/>	Dátum opravy : <input type="text"/>	Dátum testovania kvality : <input type="text"/>
Dôvod poruchy :	<input type="text"/>	1	Meno klienta : <input type="text"/>
Spôsob a výsledok spracovania :	<input type="text"/>		Kontaktné číslo : <input type="text"/>
			Adresa dodania : <input type="text"/>

Záznamy o údržbe	Dátum údržby : <input type="text"/>	Dátum opravy : <input type="text"/>	Dátum testovania kvality : <input type="text"/>
Dôvod poruchy :	<input type="text"/>	2	Meno klienta : <input type="text"/>
Spôsob a výsledok spracovania :	<input type="text"/>		Kontaktné číslo : <input type="text"/>
			Adresa dodania : <input type="text"/>

Záznamy o údržbe	Dátum údržby : <input type="text"/>	Dátum opravy : <input type="text"/>	Dátum testovania kvality : <input type="text"/>
Dôvod poruchy :	<input type="text"/>	3	Meno klienta : <input type="text"/>
Spôsob a výsledok spracovania :	<input type="text"/>		Kontaktné číslo : <input type="text"/>
			Adresa dodania : <input type="text"/>