


Elektrické wellness lehátko s vyhrievaním Azzurro 818a

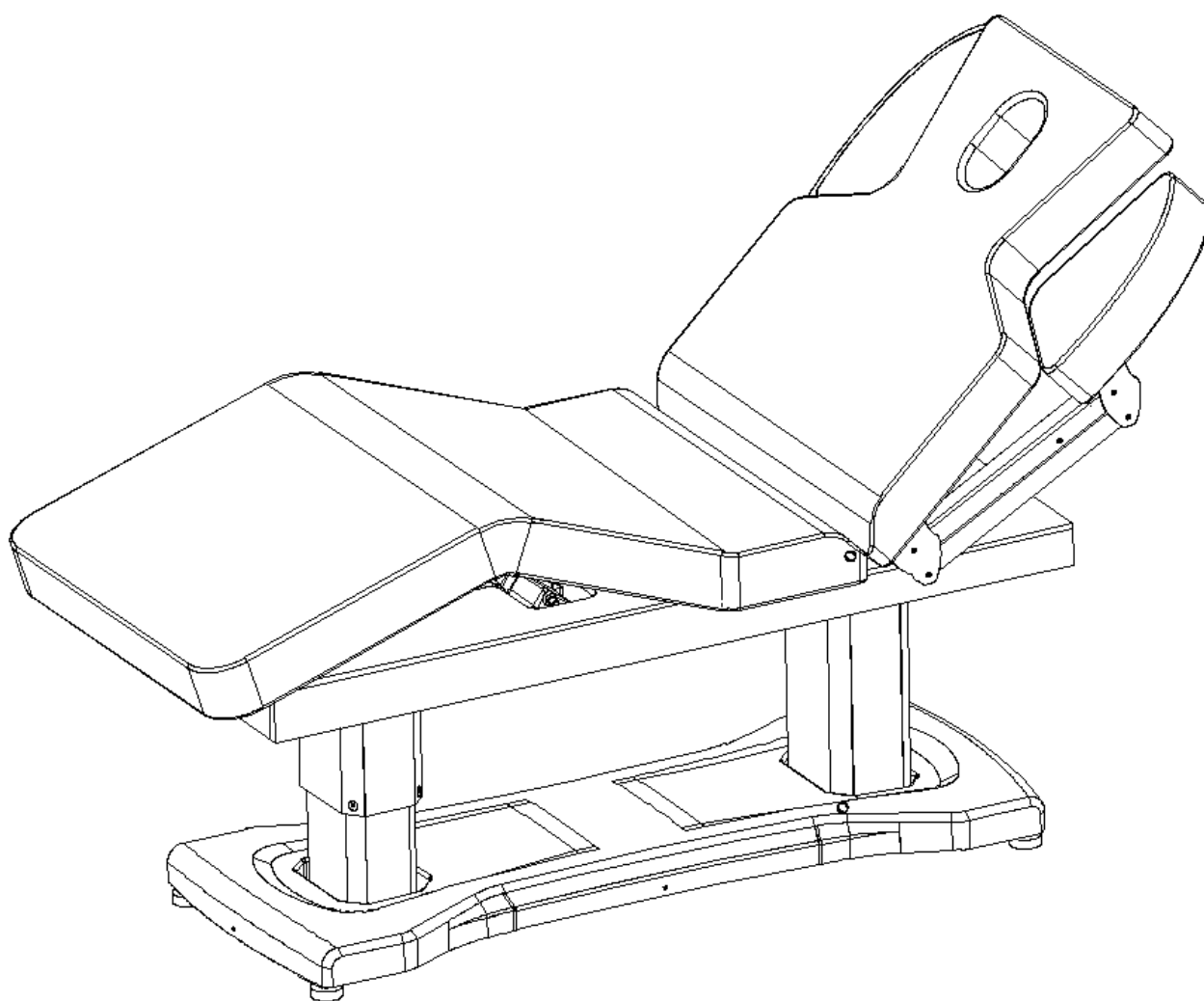

● Špecifikácia:

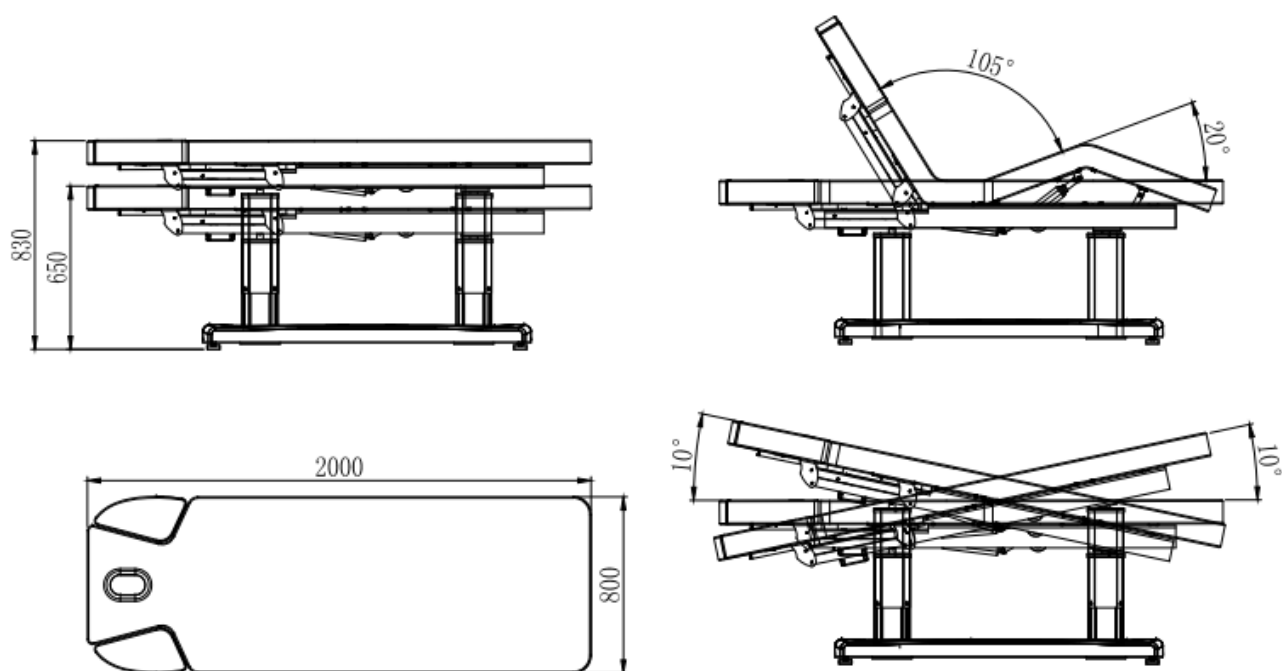


● Technické údaje:

Rozmery:	2000*800*650mm
Nosnosť:	200kg
Čistá hmotnosť	103kg
Nastaviteľný rozsah výšky	650~830mm
Vypchávka	špongia
Koža	PU/PVC

Špecifikácia použitia

● špecifikácia použitia ručného diaľkového ovládača

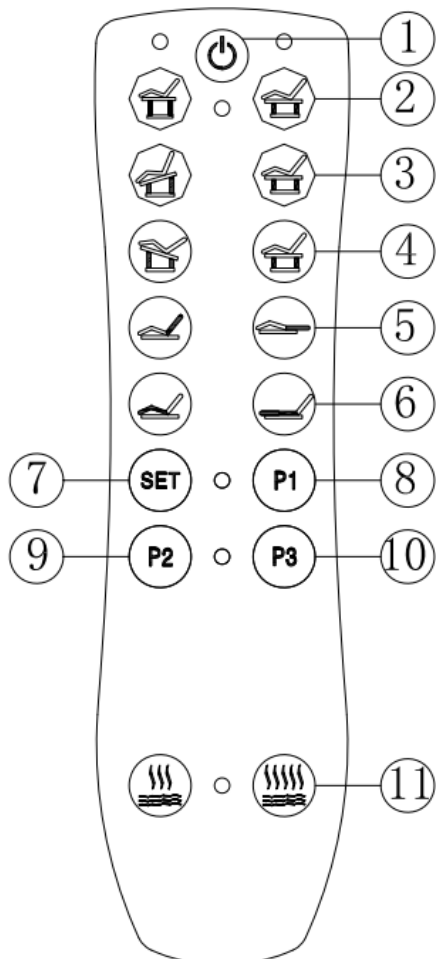

① Vypínač ovládacieho panela, stlačením zapnete ovládací panel, môžete používať všetky funkcie, stlačte znova, vypnete ovládací panel, posteľ sa vráti do pôvodného stavu, znova stlačte , prestane sa vracat'.

② Stlačením zdvihnete celú posteľ, stlačením vrátite celú posteľ dole.

③ Stlačením alebo nastavte uhol sklonu pre prednú časť posteľe.

④ Stlačením alebo nastavte uhol sklonu pre zadnú časť posteľe.

⑤ Stlačením alebo ovládajte uhla sklonu operadla.


⑥ Stlačením alebo ovládajte uhol sklonu opierky nôh.

⑦~⑩ funkcia pamäte, postupujte nasledovne: najprv nastavte požadovanú polohu výšky operadla, opierky nôh, dlho stlačte pre spustenie funkcie pamäte, potom stlačte stav pamäte alebo alebo . Môžete nastaviť 3 druhy stavu pamäte.

⑪ Stlačte tlačidlo , nízka teplota, stlačte tlačidlo , vysoká teplota.


● Nastavenie výšky

Zapnite hlavný vypínač na ovládacom paneli, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  pre nastavenie požadovanej výšky.

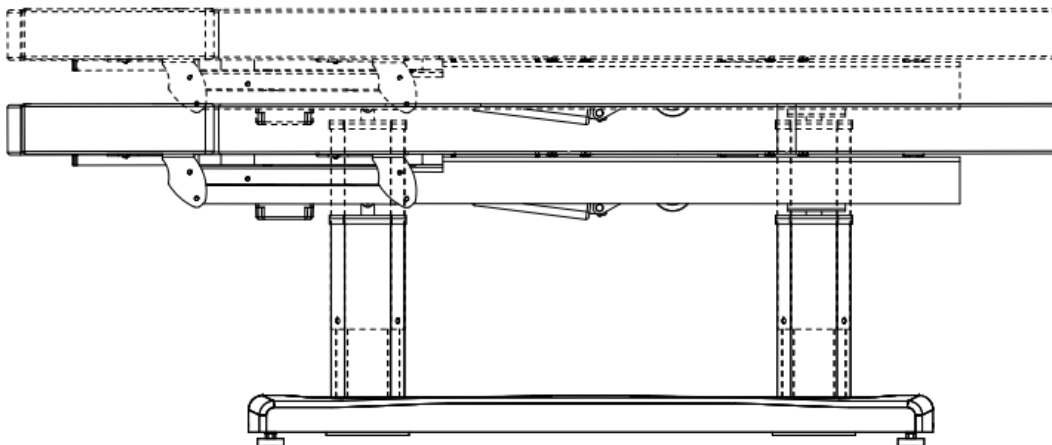


● Nastavenie uhla celej postele

Stlačte  pre nastavenie uhla nahor pre celú posteľ, stlačte , aby ste sa dostali posteľ do roviny; Stlačte  pre nastavenie uhla nadol pre celú posteľ. Stlačte  aby ste sa dostali posteľ do roviny.

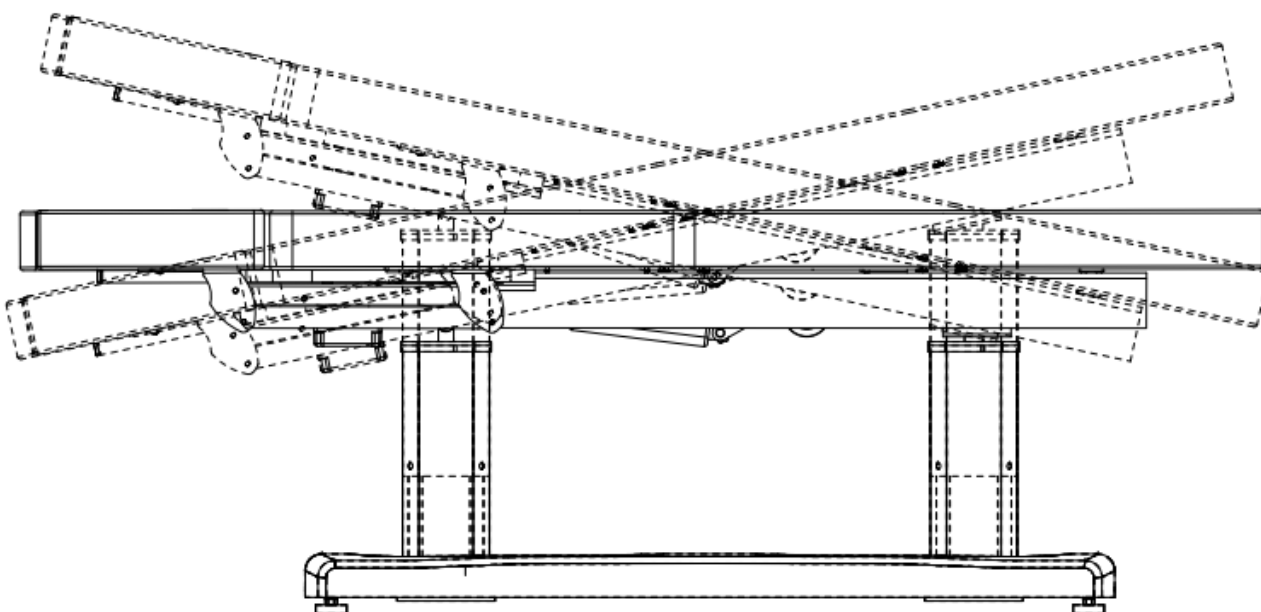


- Nastavenie operadla

Stlačte  , uhol sklonu operadla sa zväčší. Stlačte  , uhol sklonu operadla sa zmenší.

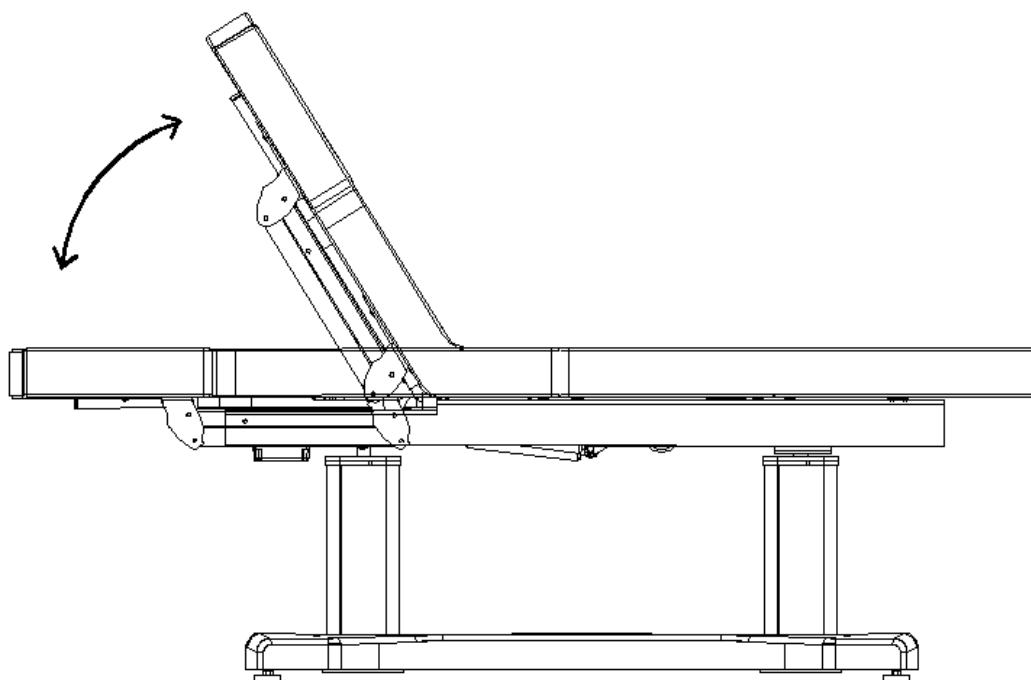


- Nastavenie opierky nôh

Stlačte  , uhol sklonu opierky nôh sa zväčší. Stlačte  , uhol sklonu opierky nôh sa zmenší.

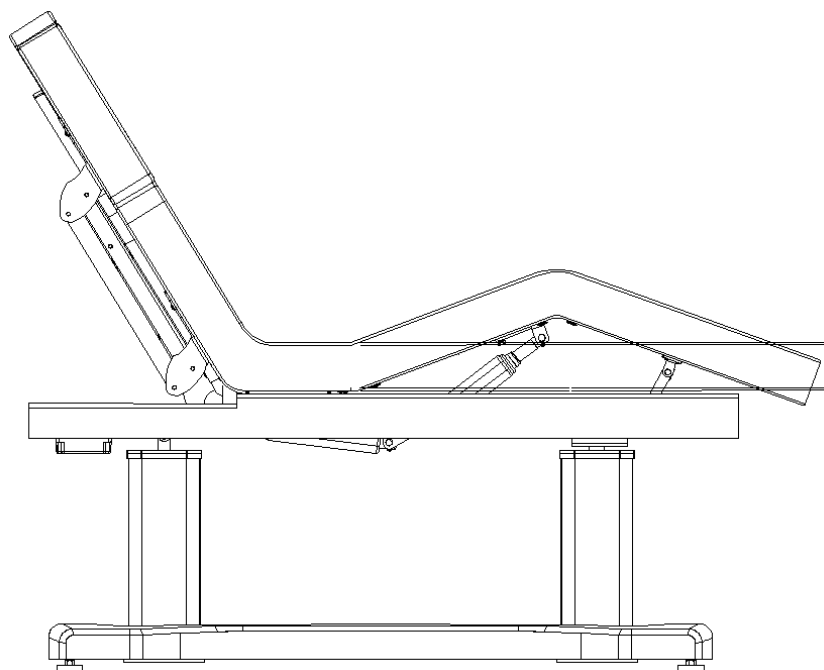


● Nastavenie lakťovej opierky

Pozrite si obrázok nižšie: podľa smeru šípky držte stlačený plynový piest a medzitým stlačte lakťovú opierku do požadovaného uhla. Alebo sa obnoví opačným spôsobom.

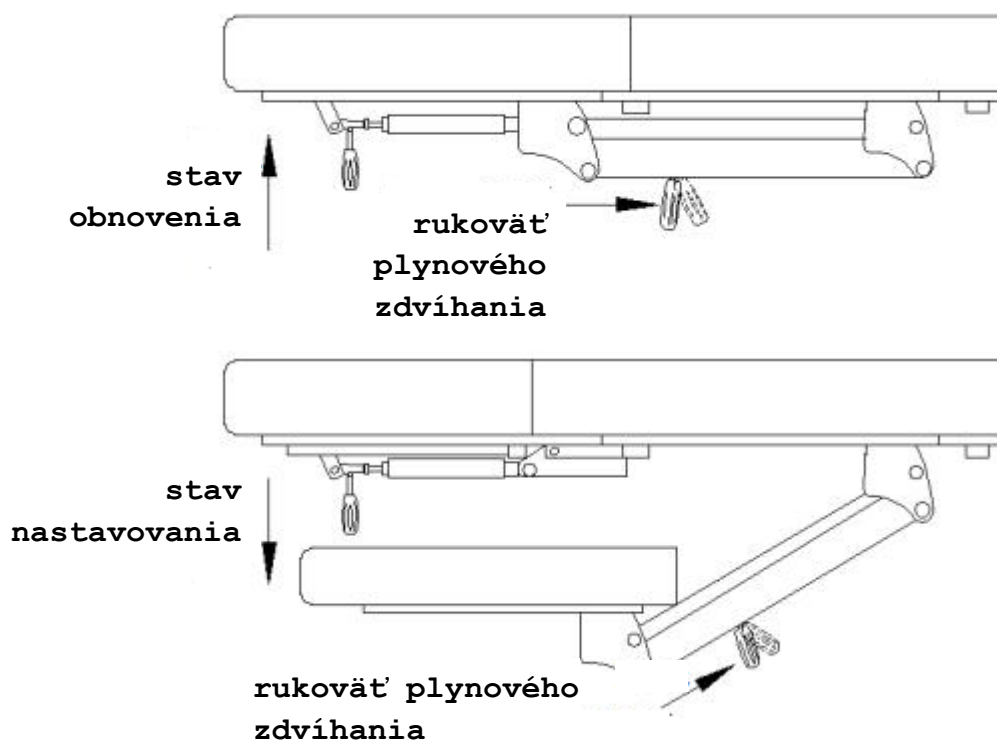

● Podnetné pokyny:

- Toto elektrické masážne lôžko používa trojvodičový napájací kábel. Preto by sa mal zasunúť do trojotvorovej zástrčky, kde je uzemňovacia elektróda. A malo by sa ubezpečiť, že sa dá hladko pripojiť k uzemňovacej elektróde, aby pri normálnej prevádzke zabránila úrazu elektrickým prúdom.
- Žiadne zástrčky, tlačidlá a ďalšie komponenty pripojené k napájacímu káblu sa nesmú ponoriť do vody alebo inej tekutiny.
- Počas chodu elektrického masážneho lôžka je zakázané dávať ruky, nohy, hlavu alebo inú časť tela do polohy ① ② ③ ④ znázornenej na obrázku.
- Je zakázané používať ak sú zástrčky, tlačidlá a iné komponenty pripojené k napájacímu káblu poškodené.
- Je potrebné si uvedomiť, že pri použití motora tohto masážneho kresla je frekvencia 6min/h.
- Údržba by sa nemala vykonávať bez oficiálneho vyškolenia.

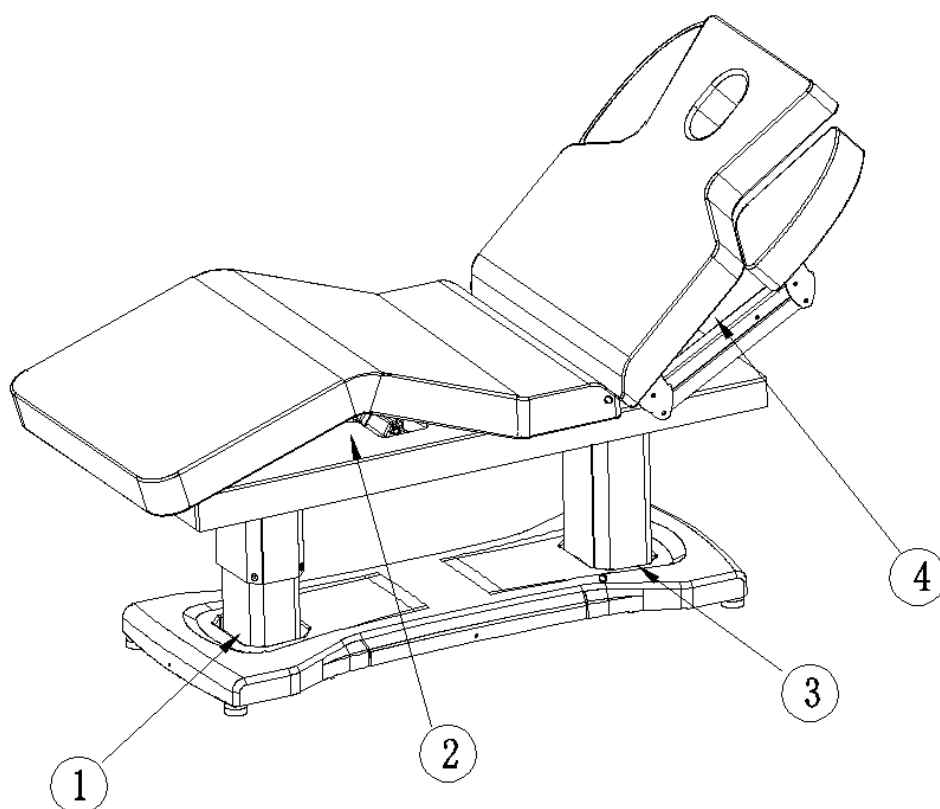

Upozornenia:

1. Toto masážne lôžko by nemali používať osoby s osteoporózou alebo srdcovými problémami.
2. Toto masážne lôžko by nemali používať ženy, ktoré sú tehotné alebo majú menštruáciu;
3. Toto masážne lôžko by nemali používať osoby zranené alebo postihnuté;
4. Toto masážne lôžko by nemali používať deti do 14 rokov bez dozoru a osoby v bezvedomí;
5. Poškodenie napájacieho kábla a zástrčky by sa malo odstrániť skôr, ako sa začne normálne používať. Poruchy by mali riešiť profesionáli alebo poskytovatelia služieb.
6. Pred oficiálnym použitím by napätie malo zodpovedať bezpečnému napätiu. Nesprávne napätie môže viesť k poruche produktu.
7. Dotýkať sa napájania mokrými rukami je zakázané, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
8. Produkt by sa nemal zapájať, kým nebude nainštalovaný.
9. Napájací kábel by mal byť odložený, aby chodci nezakopli a nespadli.
10. Povrch produktu je potrebné vyčistiť použitím mäkkej utierky s riedeným neutrálnym čistiacim prostriedkom.
11. Keď sa nepoužíva, treba ho odpojiť.
12. Nerozoberajte tento produkt bez povolenia. V prípade potreby požiadajte o údržbu oficiálnych poskytovateľov služieb.

● Údržba produktu:

1. Každodenné čistenie
Prach môžete utrieť mäkkou suchou handričkou.
2. Odstránenie veľkej špiny
Ako všetci vieme, je ťažké odstrániť veľkú špinu pomocou normálnej suchej handričky. V takom prípade môžete najprv použiť mäkkú handričku s riedeným neutrálnym čistiacim prostriedkom. A potom môžete použiť suchú handričku na vyčistenie.
3. Je zakázané používať benzén, riedidlo, benzín alebo iné rozpúšťadlo.
Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť kožu alebo spôsobiť narušenie vzhľadu výrobkov.
4. Úložné a prevádzkové prostredie
Nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu a vlhkému prostrediu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu produktu.

Tento výrobok je povolené používať pri teplote od -5 °C do 50 °C a vlhkosti od 45 % do 85 %.

● Diagnostika porúch :

Ak pri používaní produktu niečo nie je v poriadku, skúste nesprávnu činnosť skontrolovať a odstrániť nasledujúcim spôsobom:

Jav	Diagnóza	Odstránenie
Ovládajte posteľ, ale bez akýchkoľvek reakcií.	1.Vypínač napájania ovládača je zapnutý alebo nie.	1.Pokúste sa znova zapnúť vypínač napájania ovládača.
	2.Skontrolujte, či pedál dosiahol maximum.	2.Skúste iné tlačidlá, či fungujú alebo nie.
	3.Skontrolujte, či je pripojená napájacia zástrčka.	3. Odpojte sieťovú zástrčku a znova ju zapojte.
	4. Skontrolujte, či sú zapojené všetky pripojovacie zástrčky transformátora.	4. Odpojte zástrčku a znova ju zapojte.
Vydávanie zvukov a trasenie pri pohybe hore a dole	Uvoľnené skrutky	Dotiahnite všetky skrutky
Svetlo nesvieti, aj keď je vypínač zapnutý.	Vyhorela poistka.	Vymeňte poistku.
Kontrolka na ovládacom paneli nesvieti.	Kábel ovládača je odpojený alebo sa ovládač pokazil.	Najprv znova zapojte kábel ovládača. Ak stále nefunguje, vymeňte ovládač.

Poznámky: Nebudete informovaný, ak vylepšenia produktu neovplyvnia jeho vzhľad a funkciu.