


105mm

Derma Pen (Nabíjateľný model)

Špecifikácia

1. Účel
Prístroj na aplikáciu Mikro-ihlovej Terapie vibráciou
2. Spôsob použitia
Zariadenie na vpichovanie liekov alebo kozmetických nosičov prenikajúcich cez kožu s mikro-ihlou vedenou medzi a zasunutými polohami
3. Klasifikácia
- Typ ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Zariadenie triedy II
- Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Plávajúca aplikovaná časť
- Stupeň ochrany proti vniknutiu vody: Bežné zariadenie (IPXO)
- Režim prevádzky : Nepretržitá prevádzka
4. Špecifikácia
1) Názov Výrobku: Elektrické Pero Derma Stamp
2) Názov modelu:
3) Adaptér: 6V - 300MA
4) 2 ks lítiové batérie 5)
Rozmery: 14.7x 3.1cm
6) Darčeková krabica: 18.5x15.5x5.5cm
7) Jedna súprava: 1 DermaPen+2 Zásobníky na ihly

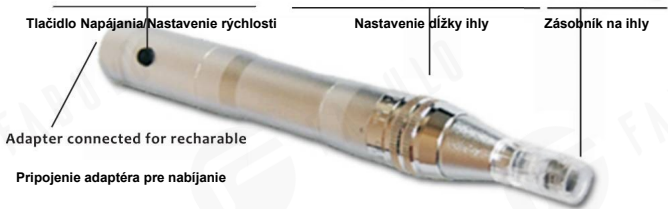

Zloženie

1. Telo 2. Adaptér (110/220 V) 3. Ihla (Voliteľná)

Názov dielov: Zásobník na ihly, Inštalácia zásobníka ihly, Úprava dĺžky ihly,

Pripojenie adaptéra, Nastavenie rýchlosti, ZAP/VYP

Ako obsluhovať

1.Nastavenie

Uistite sa, že ste zariadenie nabíjali aspoň 1 hodinu. Batéria je plne nabitá, keď sa na adaptéri rozsvieti zelené svetlo.

2 ks lítiové batérie



2.Príprava

- 1) Vyberte ihlu v sterilnom obale.
- 2) Vložením pera s okrúhlymi štrbinami do napájacej skrinky zatlačte zásobník ihly vodorovne až na doraz.
- 3) Uzamknite zásobník otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- 4) Nastavenie dĺžky ihly by sa malo vykonať po zapnutí prístroja.
- 5) Ak chcete vybrať zásobník na ihly, otočte ho v smere hodinových ručičiek a vytlačte ho vodorovne.

3. Nastavenie rýchlosti a dĺžky ihly

- 1) ZAP / VYP a Nastavenie rýchlosti
Ak stlačíte tlačidlo napájania na 2 sekundy, prístroj sa spustí a svetlo kontrolky sa zmení na žltú, pri krátkom stlačení tlačidla sa zvýši rýchlosť pohybu ihly. Rýchlosť si môžete overiť rýchlosťou blikania LED kontrolky v bledočervenej - syto červenej - fialovej – modrej farbe.

140mm

210mm

2) Nastavenie dĺžky ihly

Dĺžku ihly môžete upraviť otáčaním nastavovacieho krúžku v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Otočením v smere hodinových ručičiek sa jej dĺžka predlíži. Otočením proti smeru hodinových ručičiek sa jej dĺžka skráti.

Protí smeru hodinových ručičiek
Jej dĺžka sa skráti.

V smere hodinových ručičiek
Jej dĺžka sa predlíži.

Od 0.25 do 2.00 (mm)

3) Iná dĺžka ihly si vyžaduje iný spôsob použitia

Metóda použitia s veľkosťou 0,25, 0,30, 0,50 mm je: v koži na kruhové ošetrovanie. Metóda použitia pri veľkostiach nad 1,00 mm (1,00, 1,50, 2,00 mm) je: ako s použitím pečiatkovacieho valčeka (pečiatka na koži)

Ako používať

- 1) ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ: Dlhو stlačte

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ



2) Nastavenie rýchlosti: Po stlačení tlačidla sa zmení nová rýchlosť a nová farba



Farba: Žltá / Svetlo červená / Tmavo červená I Fialová / Modrá



Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím, si prosím, prečítajte pokyny a postupujte podľa popisu.

Použitie nie je vhodné u ľudí:

1. Ktorí majú akútne ochorenie
2. Ktorí majú alergiu a hemofíliu
3. Ktorí majú melanózu tváre
4. Horúčku
5. Ktorí pravidelne navštevujú nemocnicu
6. Ktorí užívajú lieky
7. Ktorí majú menej ako 12 rokov

Nepoužívajte ho v blízkosti miesta s vysokou teplotou, prachom alebo vlhkosťou (V blízkosti zvlhčovača). Môže to spôsobiť poruchu.

Neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte ovládač a telo (pokiaľ to nie je uvedené v našej firemnej príručke). Môže to spôsobiť poruchu.

Nedotýkajte sa zariadenia a neodpájajte napájacie káble mokrými rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nepoužívajte odizolovanú alebo popraskanú šnúru.

Môže to spôsobiť požiar (Určite ju vymeňte za inú).

Nepoužívajte popraskanú šnúru, ktorá má praskliny alebo zárezy.

Môže spôsobiť škrabance na koži.

Keď ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky

Prístroj určite prezrite a odskúšajte Ak sa zistia nejaké problémy, dajte ho opraviť.

Nikto iný ako operátor sa ho nemôže dotknúť.

Môže to spôsobiť nehody alebo poruchy.

转单黑