






NÁVOD NA POUŽITIE MASÁŽNEHO
PRÍSTROJA MINI CUPPING

POPIS IKON

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA, KTORÉ SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

	Pozor! S odkazom na priložené dokumenty
	Pozorne si prečítajte návod, prosím
	Nevkladajte špendlíky
	DC (jednosmerný)
	Životnosť elektronických informačných produktov na ochranu životného prostredia

* Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod a riadne si ho uschovajte!

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- ① Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte návod na použitie.
- ② Tento produkt nie je zdravotnícka pomôcka a neodporúča sa na lekárske použitie. Nie je určený na lekárske ošetrenie v nemocniciach.
- ③ Výrobok má ohrevný povrch a nemali by ho používať ľudia, ktorí nie sú citliví na teplo, malé deti alebo ľudia, ktorí sa nevedia o seba postarať.
- ④ Tento produkt by nemali používať deti, pokiaľ to rodičia alebo zákonní zástupcovia vopred nenastavili, alebo ak deti nedostali dostatočné pokyny na jeho používanie.
- ⑤ Pri používaní dávajte pozor na teplotu kameňa bian po zahriatí, zvolte si vlastný vhodný teplotný rozsah, hlavne teplotu prijateľnú pre pokožku, a neprehrievajte ho, aby ste predišli obareniu.
- ⑥ Pri používaní nenatierajte na ohrievané časti inú látku s vlastnou zahrievacou schopnosťou, ako je svetlicový olej, pasta z tigrej kosti atď.
- ⑦ Ak sa po použití tohto produktu s esenciálnym olejom objavia zvyšky zápachu, utrite ho čistou vlhkou handričkou, aby bol výrobok čistý. Predtým, ako ho dáte iným, treba ho vydezinfikovať 75% alkoholom, aby ste sa vyhli infekcii.
- ⑧ Tento produkt je vyrobený z prírodného kameňa bian. Je normálne, ak má drobné praskliny.
- ⑨ Počas nabíjania, prosím, prístroj nepoužívajte.
- ⑩ Pred ukončením používania prístroj vypnite.
- ⑪ Tento produkt by nemal spadnúť alebo naň niečo spadnúť z vysokej výšky. Malo by sa s ním zaobchádzať opatrne a dávať pozor, pretože je krehký.
- ⑫ Toto zariadenie nie je vodotesné. Je prísne zakázané používať ho s mokrymi rukami a nohami a je prísne zakázané používať ho vo vlhkom prostredí.
- ⑬ Je prísne zakázané používať chemické rozpúšťadlá na čistenie tela stroja, nabíjacieho kábla atď.
- ⑭ Nerozoberajte prístroj svojpomocne a prevádzkové škody spôsobené kýmkoľvek iným ako technikom spoločnosti budú znášať jednotlivci.

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU

- 1 Pred použitím esenciálnych olejov by ho mali ľudia s krehkou a citlivou pokožkou otestovať na vnútornej strane ramena alebo za uchom. Ak sa objaví začervenanie, opuch a svrbenie, prestaňte ho používať.
- 2 Pred použitím dezinfikujte základňu produktu (odporúča sa použiť 75% alkohol).
- 3 Pri používaní prosím dbajte na to, aby ste udržali doma teplo, nepoužívajte výrobok v klimatizovaných, vetraných a chladnejších priestoroch. Izbová teplota asi 25 °C je vhodnejšia.
- 4 Pri používaní škrabajte jedným smerom. Nechodte hore a dole ani doľava a doprava.
- 5 Pri jeho používaní sa objavia stopy, keď je miestna mikrocirkulácia slabá a stopy Gua Sha sa samé absorbujú. To je normálne.
- 6 Na každodenné používanie hlavne s jemnou masážou. Nesnažte sa nájsť stopy Gua Sha, škrabte, kým sa neotvoria póry a pokožka nebude sčervenaná a horúca.
- 7 Doba použitia by nemala byť príliš dlhá a nemala by byť povolená veľkoplošná masáž.
- 8 Po použití utrite esenciálny olej z natretej časti čistou papierovou utierkou alebo vlnou, aby zostala čistá.
- 9 Po použití by ste sa mali vyhybať chladu a vetru, prosím, nejedzte surové alebo studené jedlo.
- 10 Po použití je vhodné vypiť teplú vodu a odpočívať cca 15-20 minút.
- 11 Po použití sú cievy na povrchu kože rozšírené a preto by ste mali počkať 30-45 minút, kým sa osprchujete.
- 12 Ľudia, ktorí sú slabí, starí a majú málo chorôb môžu používať ľahšie techniky.
- 13 Hlava a tvár môžu byť ošetrené lubrikačnými médiami, ako je krém na tvár, a každodenné použitie je možné vykonávať cez oblečenie.
- 14 Charakteristiky znamienok Gua Sha: Farba znamienok je jasne červená, stenovo červená, fialová a čierna. Tvar znamienok sa javí ako rozptýlený, hustý alebo ako kombinácia oboch.

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

- 1 Ľudia s krvácaním alebo sklonom ku krvácaniu majú používanie zakázané. Je tiež zakázané u ľudí s kardiostimulátorom pretože môže dôjsť k zlyhaniu srdca.
- 2 Pacienti po operácii (vrátane bypassu, stentu, náhrady chlopne atď.) by ho mali používať opatrne.
- 3 Zakázané tehotným ženám!
- 4 Zakázané pre pacientov s vysokou teplotou.
- 5 Zakázané pacientom s nádormi alebo rakovinou v tele.
- 6 Používanie pri kritických ochoreniach, ako je ťažké ochorenie srdca, zlyhanie obličiek, cirhóza pečene, ascites a silný edém celého tela, je zakázané.
- 7 Koža je vysoko alergická. Používanie pri kožných ochoreniach, ako sú prasknuté vredy na koži, nové alebo nezahojené rany a traumatické zlomeniny, je zakázané.
- 8 Používanie u pacientov so sklonom ku krvácaniu, ako je trombocytopénia, leukémia, hemofília, alergická purpura a iné poruchy krvácania, je zakázané.
- 9 Používanie u ľudí, ktorí sú príliš smädní, príliš hladní, príliš syti, príliš unavení, opití alebo prehriati je zakázané. (Je zakázané používať do dvoch hodín po jedle).
- 10 Používajte opatrne u tých, ktorí sú chronicky chorí, starší, extrémne chudí a podvyživení a zdravotne postihnutí, a u tých, ktorí majú stratu elasticity pokožky.
- 11 Používanie pri akútnych vyvrtnutiach, na bolestivých častiach úrazu a zlomenín sú zakázané.
- 12 Opatrne škrabte spodnú časť brucha počas menštruácie a vynechajte spodnú časť brucha a bod Hegu počas tehotenstva.
- 13 Mal by sa používať opatrne u pacientov s nízkym krvným tlakom, irelevantnou hladinou cukru v krvi, nadmernou slabosťou a nervovým napätím.
- 14 Ak máte nejaký špeciálny zdravotný problém, používajte prístroj pod vedením lekára.



Zakázané pre tehotné ženy.



Nepoužívajte počas spánku.

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

- ① Je zakázané pre pacientov s kožnými chorobami, materskými znamienkami, ranami alebo vredmi na tele.
- ② Je zakázané používať ho na očiach, ušiach, nozdrách, jazyku a verbálnych črtách tváre. Je to zakázané vpredu a vzadu, na pupku (bod Shenque) a pod.
- ③ Na častiach, ktorým chýba podkožné tkanivo a svaly, sú veľmi blízko kostí, ako napríklad kľúčna kosť. Testy škrabania na prednej holennej kosti sú zakázané.
- ④ Keď nie je lebka dieťaťa dobre uzavretá, škrabanie hlavy a krku je zakázané.
- ⑤ Vynechajte brucho pacientov s retenciou moču.
- ⑥ Je zakázané pri akútnych úrazoch, vyvrtnutiach a pomliaždeninách.

ODPORÚČANIA:


- ① Ak je teplota horúceho obkladu príliš vysoká/sčervenaná, odporúča sa znížiť rýchlosť.
- ② Ak budete produkt používať dlhšiu dobu, mal by byť nastavený na nízku (teplotnú) úroveň odporúčanú pre nepretržité používanie.

TÝKAJÚCE SA NÍZKOTEPLNOTNÝCH POPÁLENIN:

Aj keď ide o nízku teplotu, pri dlhšom dotyku rovnakej časti pokožky môže dôjsť k popáleniu bez prehriatia a bolesti. Buďte, prosím, opatrní.

POPIS KROKOV


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRODUKTU

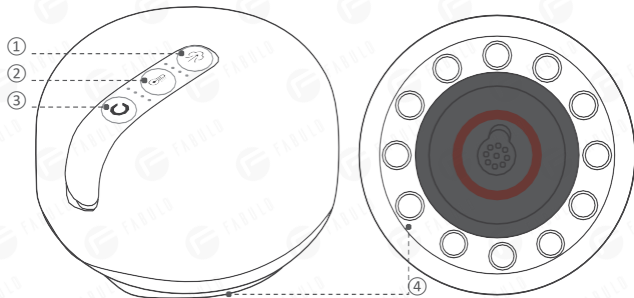


- ① Adsorpčné tlačidlo ② Tlačidlo ohrevu ③ Funkčné tlačidlo ④ Podstavec pre kameň Bian


POPIS KROKOV

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRODUKTU VYPÍNAČ PRÍSTROJA


ON : Pre zapnutie napájania stlačte a podržte [Funkčné tlačidlo ] na 1 sekundu, rozsvieti sa červené svetlo, rozsvietia sa indikátory ohrevu a adsorpčného zariadenia a zaznie bzučiak: „Píp“ ; (predvolený režim: funkcia adsorpcie a ohrevu 1. prevodový stupeň, funkcia červeného svetla zapnutá)



OFF : Pre vypnutie napájania stlačte a podržte [Funkčné tlačidlo ] 1 sekundu, všetky funkcie a príslušné indikátory sa vypnú a zaznie bzučiak: „píp píp“.

FUNKCIA OHREVU:


V zapnutom stave krátko stlačte [Tlačidlo ohrevu ], rýchlostný stupeň sa zvýši o 1 prevodový stupeň, poradie pozícií: Cyklické prepínanie „0. rýchlostný stupeň (vypnuté) – 1. rýchlostný stupeň – 2. rýchlostný stupeň – 3. rýchlostný stupeň – 4. rýchlostný stupeň“ a zaznie bzučiak: „Píp“

FUNKCIA ČERVENÉHO SVETLA:

V zapnutom stave je funkcia červeného svetla štandardne zapnutá, dlho stlačte tlačidlo [Ohrev , funkcia červeného svetla je vypnutá a zaznie bzučiak: „Píp“

V zapnutom stave je funkcia červeného svetla štandardne zapnutá, dlho stlačte tlačidlo [Ohrev , funkcia červeného svetla je vypnutá a zaznie bzučiak: „di-di tút“; opätovným dlhým stlačením tlačidla [Ohrev ] sa rozsvieti červené svetlo a zaznie bzučiak: „píp píp“, poradie prevodov: prepínanie cyklu „on-off“.




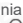

ADSORPČNÁ FUNKCIA

V zapnutom stave krátko stlačte [Adsorpčné tlačidlo , rýchlostný stupeň sa zvýši o 1 prevodový stupeň, poradie pozícií: cyklické prepínanie „0. rýchlostný stupeň (vypnuté) – 1. rýchlostný stupeň – 2. rýchlostný stupeň – 3. rýchlostný stupeň – 4. rýchlostný stupeň“ a zaznie bzučiak: „Píp“

POPIS KROKOV

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRODUKTU

FUNKCIA UVOLNENIA TLAKU

V adsorpčnom stave krátko stlačte [Funkčné tlačidlo ] alebo dlho stlačte [Adsorpčné tlačidlo , prístroj spustí funkciu „uvolnenia tlaku“ a zaznie bzučiak: „píp píp“; v stave uvoľnenia tlaku krátko stlačte [Funkčné tlačidlo ] alebo  stlačte [Adsorpčné tlačidlo , adsorpčný prevod sa vráti do prevodu pred dekompresiou.

POZNÁMKA:

Keď sú funkcie ohrevu aj adsorpcie vypnuté (0. prevodový stupeň /dekompresia), indikátory adsorpcie a ohrevu blikajú po dobu 60 sekúnd (okrem prípadu, keď je funkcia ohrevu alebo adsorpcie počas tejto doby znovu aktivovaná), hostiteľ sa automaticky vypne.

POKYNY

Po spustení prístroja si zvolte funkciu prístroja podľa svojich potrieb, naneste esenciálny olej na tú časť tela, kde je ho potrebné použiť a začnite ho používať.

ZOBRAZENIE ÚROVNE BATÉRIE

Slabá batéria	Zaznie bzučiak: „di, di, pípne trikrát“, kontrolka zabliká a po 5 sekundovom blikaní sa vypne
Nabíjanie	Kontrolky adsorpcie a ohrevu striedavo blikajú
Plné nabitie	Indikátory adsorpcie a zahrievania svetia trvale. Počas procesu nabíjania sa výrobok nedá používať a po odpojení nabíjačky sa výrobok vypne; výrobok sa vypne, keď sa nabíjačka pripojí a prístroj sa nabije.

Poznámka: Produkt sa pri nabíjaní nedá zapnúť, pred zapnutím zariadenia odpojte nabíjací napájací kábel.

POUŽITIE

VÝMENA ZÁTKY FILTRA



Odstráňte zátku filtra v spodnej časti produktu a zátku filtra môžete vyčistiť alebo vymeniť.

※ Starajte sa o vyššie uvedené príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu.

Filtračná zátku môže účinne blokovať vstup esenciálneho oleja do produktu počas masáže, čo môže účinne predĺžiť životnosť produktu.

(Po viacnásobnom použití je potrebné ju včas vyčistiť alebo vymeniť. Po umytí vodou ju jemne utrite papierovou utierkou a osušte na chladnom mieste.)

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

SCHÉMATICKÝ DIAGRAM MASÁŽE


Vo všeobecnosti potierajte časti od hlavy, krku, chrbta, hrudníka, brucha, horných končatín, dolných končatín.




škrabanie na hlave




škrabanie na tvári

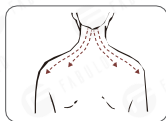

škrabanie na pleci

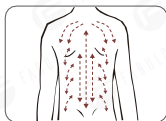


škrabanie na chrbte

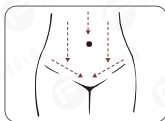


škrabanie na bruchu



škrabanie na bruchu

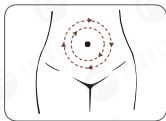

škrabanie na bruchu

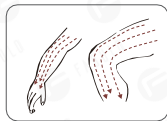

škrabanie na horných končatinách
alebo dolných končatinách

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

ČASY ŠKRABANIA A PREVÁDZKY

- ① Vo všeobecnosti je počet škrabaní pre každú časť menej ako 20-krát, čo nie je štandard pre Sha. Ak sa Sha neobjaví, netlačte na Sha. Ak po zoškrabaní Sha stále vychádza von, prestaňte škrabať, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- ② Sila škrabania by mala byť od slabej po silnú, od malej po veľkú.
- ③ Vo všeobecnosti by sa pre každé použitie malo vybrať 3 ~ 5 častí.
- ④ Podľa veku, postavy a miesta škrabania každej osoby je čas škrabania možné flexibilne upraviť.
- ⑤ Pri používaní dávajte pozor, aby ste neškriabali veľkú plochu, slabých ľudí môžete škrabať len lokálne.
- ⑥ Za normálnych okolností trvá zoškrabanie Sha 3~6 dní po prvom zoškrabaní a potom po druhom zoškrabaní. Prevláda ústup na koži (škrvny sha zmiznú).
- ⑦ Po prvom zoškrabaní sa uistíte, že škrabete na rovnakom mieste, keď Sha ustúpi.
- ⑧ Pre každodenné použitie neexistujú žiadne prísne obmedzenia v časoch a stupňoch počas prevádzky a nie je potrebné škrabať Sha. 3~10 minút zakaždým, na princípe vlastného pohodlia.

ÚDRŽBA

ÚDRŽBA

- ① Vykonať opatrenia proti vlhkosti, hľadavcom a znečisteniu.
- ② Po použití výrobok uschovajte na bezpečnom mieste. Nenechávajte na produkte ťažké predmety, aby ste predišli poškodeniu a deformácii kameňa Bian.
- ③ Ak dôjde k poruche, kontaktujte, prosím, technický personál ohľadom opravy včas, prosím nerozoberajte výrobok svojvoľne.
- ④ Výrobok uchovávajte v dobre vetranej miestnosti, vyhýbajte sa silnému slnečnému žiareniu a erózii korozívnymi plynmi a tekutinami.
- ⑤ Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- ⑥ Keď sa nepoužíva, uložte ho nasledovne: Po vychladnutí produktu odpojte napájací kábel od zdroja napájania a tela produktu a uložte ho oddelene od produktu.
- ⑦ Ak ho nebudete dlhší čas používať, vložte tento výrobok a príslušenstvo do obalu a uložte ho na suchom a vetranom mieste, alebo ho prikryte protiprachovým krytom, aby ste predišli zaprášeniu. Nevystavujte výrobok slnku, aby nedošlo k vyblednutiu alebo popraskaniu.
- ⑧ Nepoužívajte tento produkt na iné účely.
- ⑨ Vždy skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak existuje takýto náznak alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný, vráťte ho dodávateľovi pred jeho opätovným použitím.
- ⑩ Výrobok by sa mal nabíjať raz za mesiac, ak sa dlhší čas nepoužíva a mal sa vypnúť.

ÚDRŽBA

ČISTENIE

- ① Venujte pozornosť čisteniu a ochrane, zabráňte poškodeniu a znečisteniu.
- ② Pred čistením vypnite napájanie a počkajte, kým vychladne.
- ③ Potom ho očistíte mäkkou a relatívne suchou špongiou alebo vyžmýkanou mäkkou handričkou navlhčenou vodou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- ④ Pri čistení neponárajte do žiadnej kvapaliny, aby ste predišli skratu a úrazu elektrickým prúdom.
- ⑤ Na čistenie tohto produktu nepoužívajte korozívnu čistiacu kvapalinu, brúsny prostriedok, kefu, benzín, petrolej, sklo, leštidlá na nábytok a riedidlo na farby, v opačnom prípade, ak je štruktúra skorodovaná, produkt sa poškodí.
- ⑥ Po použití výrobok včas vyčistite.
- ⑦ Po dokončení čistenia produktu by sa mal na dezinfekciu použiť vatový tampón so 75% alkoholom.

PREPRAVA A USKLADNENIE

Teplota okolia: -40°C ~ +50°C;

Relatívna vlhkosť: ≤80%;

Preprava: Výrobok je vybavený jednoduchými antikorozívnymi zariadeniami, vhodnými pre leteckú, železničnú, cestnú a lodnú dopravu. Počas prepravy by sa malo vyhnúť dažďu a snehu, prevráteniu a nárazu.

ÚDRŽBA

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade poruchy počas prevádzky skontrolujte nasledovné:

ZÁKLADNÁ CHYBA	MOŽNÁ PRÍČINA	ZÁKLADNÁ METÓDA VYLÚČENIA
nie je možné zapnúť	nízka kapacita batérie	Nabite výrobok
	produkt sa nabíja	Pred použitím ho nabite
nenabíja sa alebo žiadne zobrazenie nabíjania	kábel USB je pripojený správne alebo nie	Skontrolujte, či sú oba konce kábla USB správne zapojené
žiadny pocit tepla	nízka kapacita batérie	Nabite výrobok
žiadne odsávanie	nízka kapacita batérie	Nabite výrobok

OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

Keď sa výrobky a obaly likvidujú, nemali by sa ľubovoľne rozoberať, vyhadzovať ani spaľovať. Mali by byť zaslané do stanice na recykláciu odpadu v súlade s príslušnými národnými zákonmi a predpismi.

PARAMETRE VÝROBKU

PARAMETRE VÝROBKU

Názov výrobku	MASÁŽNY PRÍSTROJ MINI CUPPING
Model	CI162A
Parametre nabíjača	5V --- 1A
Menovité napätie	3.7V ---
Menovitý výkon	11W
Kapacita batérie	2000mAh
Čas nabíjania	Cca. 160min
Časovanie	Cca. 15min
Materiál	Kameň Bian, ABS, Silikón, atď.
Čistá hmotnosť	Cca. 220g
Rozmery výrobku	Cca. 82×80×55mm
Typ bezpečnosti	Spotrebiče triedy III
Výrobca	New Design Biotechnology Co., Ltd
Adresa	Room 101, No. 1 Building, No. 265, Chigang West Road, Haizhu District, Guangzhou
Výrobná šarža	Viď typový štítok
Verzia č.	E-01

※Parametre ako veľkosť a hmotnosť produktu sú referenčné hodnoty a skutočný produkt má nakoniec prednosť.