


70,00 mm

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a dodržujte správne pokyny.

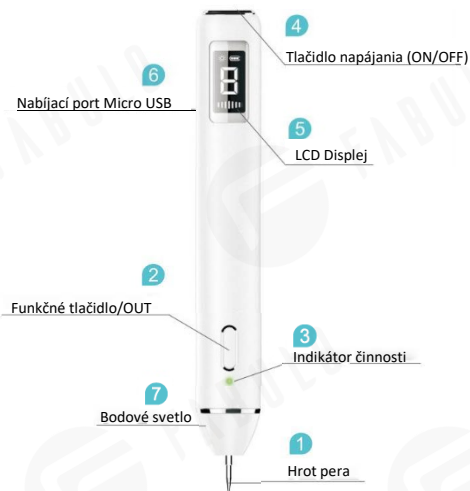

Profesionálny odstraňovač tmavých škvŕn využíva najnovšiu technológiu, ktorá vám pomôže efektívne a okamžite odstrániť kožné fibrózy, tmavé škvŕny, pehy, materské znamienka, bradavice atď. Jednoduché a bezpečné použitie. S týmto kozmetickým prístrojom si zlepšíte pleť a zmeníte svoj život!

PROFESIONÁLNY ODSTRAŇOVAČ TMAVÝCH ŠKVŔN

Obsah balenia


- 1 * Odstraňovač fibromov
- 10* Tenkých ihliel
- 1 * USB kábel
- 1 * Používateľská príručka
- 3 * Hrubé ihly (vrátane ďalšieho chrániča ihly)

Technické údaje


Materiál	ABS + Oceleová ihla	Vstupný prúd	5 V/1 A
Kapacita batérie	800mAh 3.7V	Výstupný výkon	MAXSW
Rozmery výrobku	182* 26* 26mm	Hmotnosť výrobku	75g
Rozmery balenia	200* 96* 36mm	Hmotnosť balenia	200g

Vlastnosti

- 6. generácia nemeckej technológie výroby
- Riadenie mikropočítača a ochrana proti nadmernému vybitiu, bezpečné použitie
- 10 nastaviteľných úrovní vyhovuje rôznym potrebám
- LCD displej zobrazuje úroveň a stav batérie
- Bodové svetlo uľahčuje prácu na tmavých miestach
- 10 vymeniteľných tenkých ihliel a 3 hrubé ihly, robustné a odolné
- Ikona batérie bude blikať, keď je batéria takmer vybitá

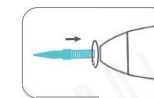

1. Napichnite hrubú ihlu priamo do hrotu pera.

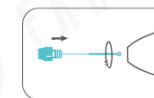

2. Najprv vložte tenkú ihlu do chrániča ihly a potom navlečte chránič ihly do hrotu pera.

Aplikačné metódy

1. Zostavte ihlu: dezinfikujte ihlu a kožu alkoholom. Zaskrutkujte hrubú ihlu do otvoru špičky v smere hodinových ručičiek. Zaskrutkujte hrubú ihlu do otvoru špičky v smere hodinových ručičiek.
2. Zapnutie/vypnutie: pre zapnutie/vypnutie stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Na LCD obrazovke sa zobrazuje ukazovateľ batérie a úroveň. Ak počas 10 minút nevykonáte žiadnu činnosť, automaticky sa vypne.
3. Ovládanie prevodových stupňov: stlačením tlačidla napájania na jednu sekundu prepnete prevodový stupeň z 1-10 na výber priradenej úrovne. Pevne držte pero, kým stlačíte tlačidlo OUT, čím sa rozsvieti zelené svetlo. jemne poškrabte póry alebo pokožku tam a späť. Ihla nemôže zostať na jednom mieste príliš dlho a ak zostane, automaticky sa prepne do režimu spánku a pracuje viac ako dve minúty.
4. LED svetlo: keď je pero zapnuté, rýchlym dvojitým kliknutím na tlačidlo napájania sa zapne svetlo a môžete ho vypnúť opätovným dvojitým kliknutím.

Metody nabíjania

1. Na pripojenie USB kábla a pera použite adaptér 5V/1A (prípravený zákazníkmi). Zelený indikátor blika.
2. Zelené svetlo predstavuje úplné nabitie (asi 2 hodiny).

Počas nabíjania, prosím, prístroj nepoužívajte. Okrem toho nadmerné nabíjanie alebo nabíjanie, keď je batéria úplne vybitá, skráti životnosť batérie.

Úrovňové použitie (len pre referenciu)

Úroveň	Typ ihly	Použitie na
1-2	Tenká	Tuková granula
3-4	Tenká	Malé materské znamienka
	Hrubá	Malé miesta
5-6	Tenká	Malé a stredne veľké materské znamienka
	Hrubá	Malé a stredne veľké miesta
7-8	Tenká	Materské znamienka veľkosti fazule mungo
	Hrubá	Škvŕny a plaky veľkosti fazule mungo
9-10	Tenká	Veľké materské znamienka
	Hrubá	Veľké škvŕny, plaky atď.

Pozor: Používatelia musia začať používať od úrovne 1 a vybrať iné úrovne podľa výsledkov používania.

Poznámky

1. Pred použitím prístroja na koži si, prosím, nacvičte na zvieracej koži, kým ho nebudete vedieť ovládať odborné.
2. Pred ošetrením by ste mali zvážiť aplikáciu čiastočnej anestézie podľa vašej tolerancie bolesti a vami liečeného miesta. Počas ošetrenia sa zápachu z pálenia obávať nemusíte.
3. Neškrabte ani nečistite ošetrovanú oblasť silne alkalickou kvapalinou. Jednoduchá starostlivosť bude postačovať. Počas obdobia hojenia (1-3 mesiace) nejedzte korenéné jedlá a dodržiavajte zdravý životný štýl.
4. Neošetrujte veľkú plochu (väčšiu ako 2 – 3 cm) v rámci jedného cyklu liečby, pretože veľká rana zvyšuje riziko infekcie a krvácania. Odporúča sa rozdeliť do štyroch alebo piatich liečebných cyklov.
5. Keď sa rana hojí, môžete cítiť svrbenie. Chrastu prosím neškrabte, v priebehu 20 až 30 dní sa sama odlúpe.
6. Počas prevádzky je lepšie nosiť rukavice.
7. Ihlu po použití vyberte včas a po vyčistení a dezinfekcii ju uchovajte na suchom mieste.
8. Pri úmyvaní neponárajte toto zariadenie do vody.
9. Počas nabíjania, prosím, prístroj nepoužívajte. Odporúča sa nabíjať každé tri mesiace, aby sa predĺžila životnosť batérie, keď je zariadenie dlhší čas mimo prevádzky.
10. Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí, domácich zvierat a nesúčinného personálu.
11. Používanie u starších ľudí, detí, tehotných žien, ľudí s niektorými chorobami srdca a ľudí náchylných na vydesenie musí byť veľmi opatrné. Ak máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na odborníkov.

Praktické rady

Odstránenie tmavých škvŕn: môžete jasne vidieť, že povrch melanínu sa zmení na zuhoľnatený po tom, čo sa akusektor jemne dotkne miesta a pohybujte tam a späť. Potom miesto utrite vatovým tampónom. Ak je miesto svetlé a malé, postačí jednorazové ošetrenie. V závislosti od veľkosti škvŕn sa môžete pohybovať tam a späť niekoľkokrát je potrebné. Venujte zvýšenú pozornosť operačnému procesu, skúsený pracovník by mal zostať nehybný a operátor by mal držať pero pevne bez chvenia rúk, aby nedošlo k popáleniu a zanechaniu akejkoľvek jazvy.

Odstránenie materských znamienok: pri odstraňovaní materských znamienok je veľmi dôležité určiť ich veľkosť a hĺbku. Niektoré materské znamienka rastú na povrchu kože, ale niektoré hlboko v podkožnom tkanive. Odporúča sa odstraňovať materské znamienka v malých štvorcoch, namiesto toho, aby ste raz prepíchlí celý povrch materského znamienka. Okrem toho, že sa vyhnete zápalu, radšej si podľa rady lekára 2-3 dni pred hojením rany natierajte niektorými liečivami alebo výživným krémom podporujúcim rast buniek, aby ste predišli podráždeniu pokožky.

Odstránenie Granulácií: jemne sa dotknite koreňa granulácie s akusektorom, aby sa koreň oddelenej granulácie spálil laserom. A granulácia automaticky odpadne približne za týždeň. Odstránenie hlbokoj rastovej granulácie možno rozdeliť na niekoľko krát. Okrem toho vyhýbajúc sa zápalu, radšej podľa rady lekára aplikujte výživné krémy napomáhajúce rastu buniek, aby ste sa vyhlíli podráždeniu pokožky 2-3 dni pred hojením rany.

Odstránenie sarkoidov: jemne sa dotknite koreňa sarkoidu s akusektorom, aby sa koreň oddeľovaného sarkoidu spálil laserom. A sarkoid automaticky odpadne približne za týždeň. Liečbu hlbokých rastových sarkoidov možno rozdeliť na niekoľko krát. Okrem vyhýbania sa zápalu, radšej si podľa rady lekára 2-3 dni pred hojením rany natierajte niektorými liečivami alebo výživným krémom podporujúcim rast buniek, aby ste predišli podráždeniu pokožky.

Odstránenie tetovania: je lepšie použiť hrubé ihly, pretože plochy tetovania sú vo všeobecnosti väčšie. Okrem toho, že to stojí viac času, metóda odstraňovania tetovania je takmer rovnaká ako metóda odstraňovania tmavých škvŕn. Odstránenie väčších tetovaní (viac ako 3 cm) by sa malo rozdeliť na niekoľko krát. Nedokončujte odstraňovanie naraz, inak to spôsobí bakteriálnu infekciu a katastrofálne následky. Používatelia by mali byť dosť opatrní. Ak dôjde k závažnému zápalu, choďte čo najskôr do nemocnice.

90*70 mm