
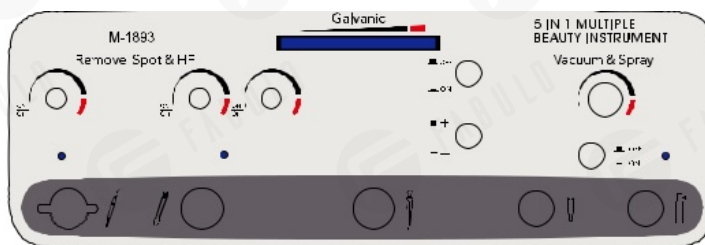


## Kozmetický prístroj 5V1 ELEGANTE 1893

M-1893

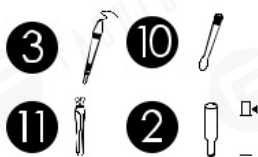

### ② Oboznámenie sa s odsávacími a sprejovými operáciami

Účel: dodať živiny po odstránení prebytočných nečistôt v póroch

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	Dve sprejové fľaše, 1 odsávacie pero s tromi rôznymi veľkosťami prísaviek, červená a čierna hadica
Spôsob prevádzky	1. Odsávacie pero sa pripája k červenej hadici a efekt odsávania sa vytvára pridržením otvoru odsávačky. Pre rôzne časti sa používajú tri rôzne veľkosti prísaviek. 2. Sprej pripojte k čiernej hadici a ukazovák stlačte horný otvor, aby ste vytvorili efekt rozprašovaného mlieka.
Bezpečnostné opatrenia	
<p>1. Nedržte za jednu časť tela, aby ste predišli poškodeniu pokožky. 2. Použitie príslušenstvo sa umyje neutrálnym čistiacim prostriedkom, sterilizuje a udržiava sa v suchu. 3. Nepoužívajte viskózne kvapaliny, inak môžu ľahko spôsobiť upchatie. 4. Poradie nasávania a sprejovanie nie je možné zameniť, inak dôjde k poškodeniu vzduchového čerpadla. 5. Pamätajte na farbu použitej hadice, aby ste sa vyhli použitiu hadice na nasávanie na sprejovanie, aby sa nečistoty vo vnútri hadice nerozprášili na tvár.</p>	

### 3. Oboznámenie sa s odstraňovaním škvŕn

Účel: rozbiť melanín

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	Pero na odstraňovanie škvŕn
Spôsob prevádzky	1), Zapnite hlavný vypínač, aby ste nastavili gombík intenzity na mierny režim, vyskúšajte, či nedostanete elektrický šok listami alebo mydlom. 2), Odstránenie škvŕny alebo materského znamienka: priložte elektroakupunktúrnú ihlu na miesto škvŕny a pohybujte vodorovne. Je vidieť, že melanín po zavedení elektroakupunktúrnej ihly sčernie a odpadne. Malý a ľahký bod je možné odstrániť naraz; inak to treba preliečiť 2-3x. 3. Po zákroku sa nedotýkajte vody. Naneste trochu protizápalového lieku na ranu.
Rozsah použitia	Chloazma, spálenie od slnka, pehy, starecké škvŕny, tetovanie atď.

## ⑩ Oboznámenie sa s prevádzkou elektroliečby

Účel: urýchliť hojenie kožných rán vykonaním sterilizácie ozónom a znížením zápalu na koži s vyrážkami alebo inými problémami

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	1 elektroliečebná tyčinka s jednou hadičkou v tvare hada, jednou hríbovou rúrkou, jednou zakrivenou rúrkou
Spôsob prevádzky	1. Vložte vodič do držiaka vodiča. 2. V závislosti od ošetrovaného miesta vložte do elektroterapeutickej tyče rôzne tvary sklenených trubíc. 3. Zapnite napájanie a nastavte ovládač intenzity tak, aby fungoval. 4. Najprv po použití vráťte gombík intenzity na nulu a po vypnutí napájania vytiahnite sklenenú trubicu.
Bezpečnostné opatrenia	1. UV sklenená trubica by mala byť vždy čistá a suchá. 2. Pri vykonávaní elektroterapie by ste sa nemali príliš dlho zdržiavať na tom istom mieste, aby sa predišlo zjazveniu. 3. Pred ošetrením si na seba nedávajte kovové šperky.

## ⑪ Oboznámenie sa s prevádzkou liečby galvanickým prúdom

Účel: odstrániť nečistoty a vyčistiť pokožku; import živín a doplnenie vlhkosti.

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	Jedna rukoväť na liečbu galvanickým prúdom
Princíp	Pomocou fyzikálneho princípu odpudzovania rovnakej polarizácie elektród a priťahovania opačnej polarizácie, exportovať nečistoty do pórov a pretlačiť esenciálny olej/telové mlieko/pleťový krém s aktívnymi iónovými zložkami do pokožky cez póry, potné žľazy a bunkové priestory (kladný pól pre export, záporný pól pre import)
Spôsob prevádzky	Keď je kľúčový prepínač otočený do polohy „+“, je v stave exportu. Keď je kľúčový prepínač otočený do polohy „-“, je v stave importu.