


Postup zostavenia prístroja F-833

- 1) Po vybalení jednotlivých častí odmontujeme zadný kryt stĺpika pomocou priloženého skrutkovača.




- 2) Pomocou priložených skrutiek a podložiek pripevníme stĺpik na základňu s kolieskami.

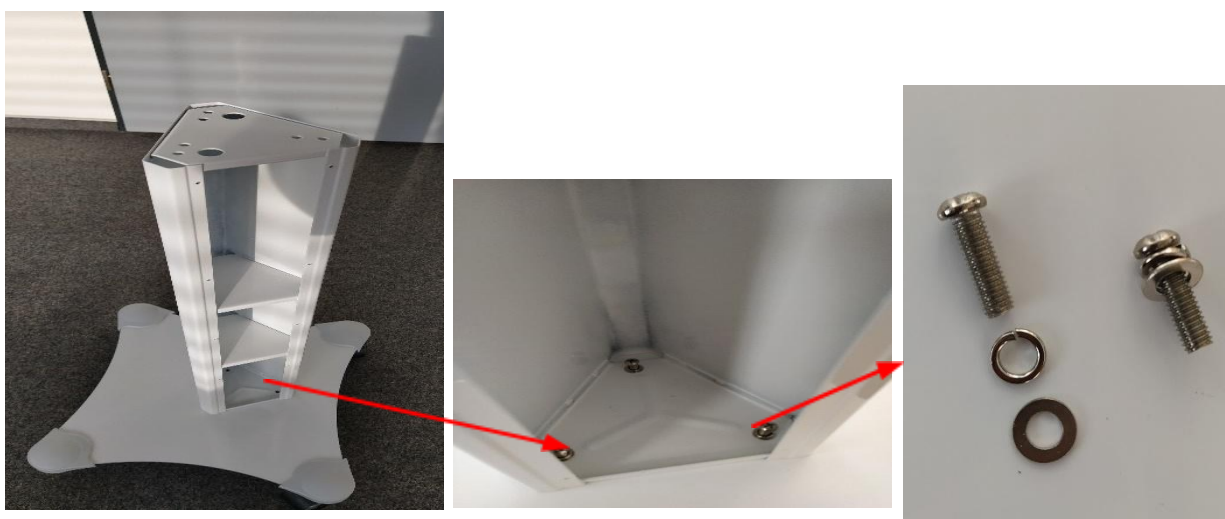

3) Gumovú podložku položíme na vrchnú časť stĺpika podľa výrezov.



4) Masážny prístroj položíme na gumenú podložku a na priskrutkovanie použijeme rovnaké skrutky ako v spodnej časti.

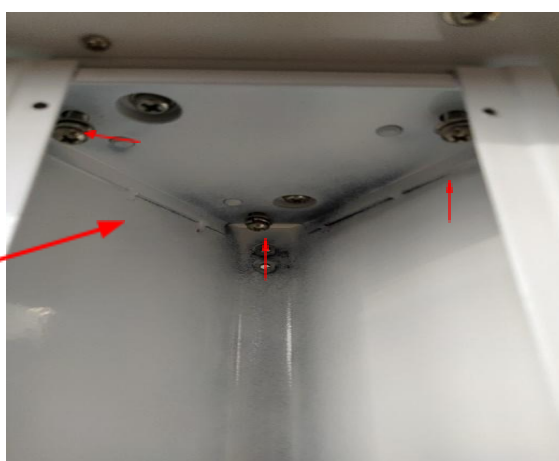

5) Držiak plastovej vaničky pripevníme na prednú stranu stĺpika pomocou rovnakých 4 skrutiek ako sme používali doteraz ale bez použitia podložiek. Po pripevnení držiaka vaničku len vložíme do rámu.



- 6) Odkladací držiak pripevníme na ľavý bok stĺpik a prístroja. Použijeme 3 skrutky, odlišné od tých, ktoré sme používali doteraz. Pre prichytenie do prístroja použijeme aj podložky. Skrutka, ktorá sa pripevňuje do stĺpika je bez podložky.



- 7) Hadicu masážneho prístroja pripevníme pomocou imbusového kľúča. Dôsledne skontrolujte, či je úplne zasunutá a dostatočne upevnená.



8) Ochranný kryt kábla zakrútime na určené miesto.



9) Na masážnu hlavicu nasunieme ochranný plastový kryt a hlavicu naskrutkujeme na kábel.



10) Na hlavice masážneho prístroja naskrutkujeme hlavicu, podľa toho, ktorú časť tela idete masírovať.



11) Po zapojení do elektrickej siete je prístroj pripravený na použitie.

