

Ultrazvuková špachtľa na tvár Beauty Start



NABÍJANIE

1 Nabíjanie cez USB


Po rozbalení nie je batéria plne nabitá. Prosím, pred používaním zariadenia ju nabite na 100%.

2 Na nabíjanie môže byť použité USB rozhranie počítača, adaptér (predáva sa samostatne) alebo mobilný telefón.

Pri nabíjaní svieti LED svetlo, po plnom nabití prestane svietiť.

Pre nabíjanie skontrolujte stav lítiovej batérie.

Pred prvým použitím prosím odstráňte ochrannú fóliu.

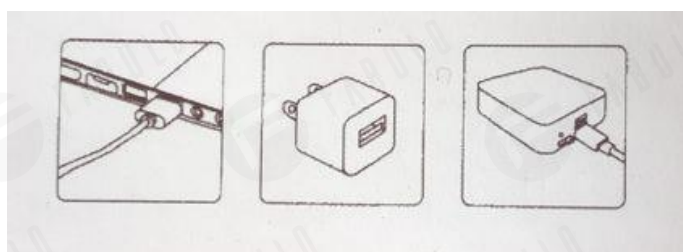

POZNÁMKY

Ak zariadenie napriek dlhému stlačenou vypínača neviete zapnúť, dajte ho nabiť.

Ak počujete zo zariadenia zvuk „bí-bí-bí“, nabite ho. Znamená to, že už nemá energiu a samo sa vypne.

Ak sa zariadenie nepoužíva po dobu 10 minút, automaticky prejde to režimu spánku a po ďalšej minúte nečinnosti sa automaticky vypne.

Na plné nabitie je potrebných 150 minút (na prvé nabitie je potrebných 5 hodín).

Po plnom nabití je možné zariadenie používať 80 minút.

Zariadenie nabite ešte predtým než sa samo z nedostatku energie vypne.

POUŽITIE

Čistenie tváre

1 Stlačte tlačidlo zapnutia na 2 sekundy, zariadenie sa zapne.

2 Stlačte tlačidlo raz, čím sa vyberie režim Čistenia. (CLEANSING)

Režim čistenia s funkciou farebného svetla súčasne. Podržte obe strany vodiča, aby ste vstúpili do režimu kladných iónov. Pred spustením režimu je lepšie očistiť tvár.

3 Namažte tvár esenciou.

4 Vyčistite tvár sonickou hlavicou ako je znázornené na obrázku.



Vlhčenie

1 Stlačte tlačidlo zapnutia na 2 sekundy, zariadenie sa zapne.

2 Stlačte tlačidlo dvakrát, čím sa vyberie režim Vlhčenia. (MOISTURIZING)

Režim vlhčenia s funkciou farebného svetla súčasne. Podržte obe strany vodiča, aby ste vstúpili do režimu záporných iónov. Pred spustením režimu je lepšie použiť rúško.

3 Namažte tvár esenciou.

4 Navlhčite tvár sonickou hlavnicou ako je znázornené na obrázku.




Lifting

1 Stlačte tlačidlo zapnutia na 2 sekundy, zariadenie sa zapne.

2 Stlačte tlačidlo 3 x pre nastavenie režimu vlhkosti.

3 Namažte tvár esenciou.

4 Začnite lifting sonickou hlavnicou ako je znázornené na obrázku 2.

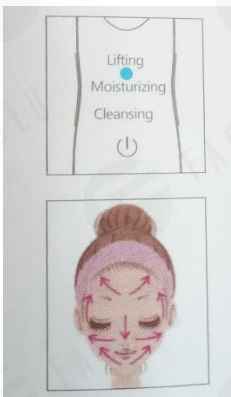

Čistenie a údržba

1 Uistite sa, že zariadenie je odpojené.

2 Vyčistite zariadenie vatovými tampónmi alebo mäkkou tkaninou.

Na čistenie sonickej hlavy nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá a iné korozívne priemyselné produkty, inak hrozí poškodenie produktu.

3 Udržiavajte zariadenie na suchom a chladnom mieste.

Nedržte zariadenie na vlhkom mieste ako napr. kúpeľňa.

Uchovávajte mimo dosahu detí.