

Princíp činnosti

Aj keď je kontaktná plocha veľmi malá, sila chiropractickej pištole môže preniknúť do všetkých stavcov, ktoré sa majú korigovať, pokiaľ je korekčná poloha správna. Hlavnou vlastnosťou chiropractickeho aktivátora je rýchlosť, ak je rýchlosť príliš nízka, odpor tela bude väčší. Podľa výskumu je rezonančná frekvencia chrbtice zozadu dopredu 30 až 50 Hz a rozsah pohybu kostí je až 0,3 --- 1,6 mm, experiment dokázal, že ak by sa sila 140 N použila aj v stavcoch L4, môže maximálny pohyb stavcov 1,6 mm kosti v tomto veľmi krátkom časovom období stačiť na dokončenie korekcie. Keďže korekcia už prebieha, rýchlosť je najdôležitejším faktorom účinnosti korekcie. Zarovnávač prenáša silu za 0,3 milisekundy a kosť je v tomto krátkom časovom úseku korigovaná.


Indikácie sú nasledovné

1. Korekcia subluxácie alebo posunu kĺbov horných, hrudných, bedrových, dolných, kaudálnych a panvových stavcov.
2. Lieči bolesti hlavy, krku, ramien, chrbta, bedrovej oblasti a necitlivosť končatín, skoliózu, herniaciu disku a iné ochorenia chrbtice spôsobené kompresiou nervov v dôsledku pohybu a subluxácie stavcov.
3. Zmierňuje bolesť svalov, bolestivosť, necitlivosť a stuhnutosť spôsobenú subluxáciou alebo pohybom hlavných stavcov, hrudných stavcov, driekových stavcov, dolných stavcov, kaudálnych stavcov a panvových kostí,
4. Lieči bolesť a nepohodlie spôsobené osteofytmi, reumatizmom, kostnými ostrohami, natiahnutím bedrových svalov atď. HA 5. Vyrovnáva svalový tonus, revitalizuje šľachy a svaly a zlepšuje funkciu orgánov.
5. Mikro úprava tváre

Podrobnosti o chiropractickeho aktivátore:



Ako sa používa.

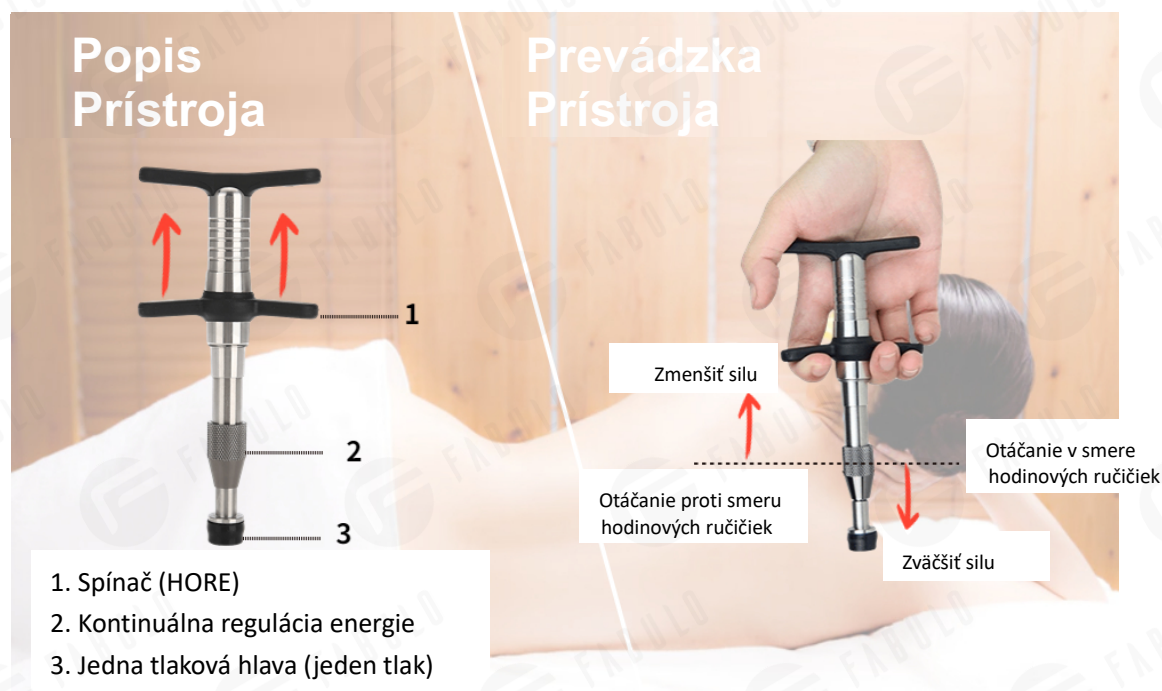

Detaily

Produkt: Jemný chiropraktický aktivátor

Model: HLAM-AMS-003

Veľkosť tela pištole: 19 x 8,8 cm

Veľkosť vonkajšieho balenia: 26x16x5cm

Inteligentné nastavenie: Nastavenie vhodnej sily gombíkom

Sila: 80N -280N

Hlavný materiál: nehrdzavejúca oceľ

Obsah balenia: jedna hliníková krabica a jeden návod na použitie

Upozornenia

1. Tento výrobok vyžaduje pred použitím odborné pokyny.
2. Kontraindikácie (relatívne) Nezahojené zlomeniny.
Nádor, tuberkulóza, ťažká osteoporóza.
4. Srdce so stentom alebo fixátorom.
5. Lokalizovaný zápal vo forme mokvania.
6. Prestaňte používať, ak sa po vystavení vibráciám cítite nepríjemne.

Údržba a skladovanie

Pri čistení nenalievajte do prístroja kvapalinu, výrobok neskladujte pri vysokej teplote alebo v blízkosti zdroja ohňa, prístroj je produktom špeciálnej výroby a dizajnu, bez potrebnej dodatočnej údržby, prístroj by ste nemali sami rozoberať ak nechcete znášať následky.