

Upozornenie

1. Ak chcete tento prístroj presunúť, je potrebné ho jemne zdvihnúť a opatrne ho položiť; v prípade zlyhania, naň prosím, tvrdo neklopte, aby ste predišli poruche spôsobenej dopadom.
2. Ak chcete tento nástroj presunúť, je potrebné ho držať horizontálne, aby sa zabránilo vibráciám a nárazom.
3. Nestláčajte prístroj ani neumiestňujte ťažké veci na prístroj, aby sa zabránilo deformácii puzdra, poškodeniu alebo poruche.
4. Je potrebné zvoliť odpovedajúce pracovné napájanie v súlade so značkami na telese prístroja.
5. Tento nástroj sa nesmie používať v kúpeľni.
6. Aby ste zabránili nehode zásahom bleskom, keď hrmí, vypnite vypínač napájania a vytiahnite sieťovú zástrčku.
7. Nie je dovolené vstrekať žiadnu tekutinu do telesa prístroja tak, aby sa zabránilo poškodeniu prístroja v dôsledku skratu.
8. Ak sa prístroj nebude používať dlhší čas, je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technické parametre

1. Prevádzkové napätie: AC 220V--AC 240V
2. Maximálny výkon celého prístroja: 25W
3. Veľkosť balenia: 26.5 *14*22.5 (D*V*Š) cm

SMART 671

Kozmetický prístroj

Používateľská príručka



Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Prejdite si prosím túto príručku pred použitím, aby ste zabezpečili maximálny výkon prístroja a bezpečnosť pri používaní. Vhodne uchovajte pre ďalšie využitie.

Funkcia

※ Ozonizér

1. Počas ošetrovania sa uvoľňujú čiastočky ozónu - ten dezinfikuje a stimuluje pokožku.
2. Zbavte sa škvrn, pigmentácie, vyrážok a akné.


※ Galvanizácia

1. Dôkladne sa zbavte všetkej špiny, nečistôt, tuku z hlbokých pórov kože.
2. Vyživuje pokožku a zlepšuje stav pokožky.

Špecifikácia

1. Jednoduchá a rýchla prevádzka použitím najnovšej mikropočítačovej technológie
2. Inteligentná a spoľahlivá liečba použitím 10 nastaviteľných úrovní
3. Rôzne metódy, ktoré sú k dispozícii použitím pulznej vlny

Popis ovládacieho panela

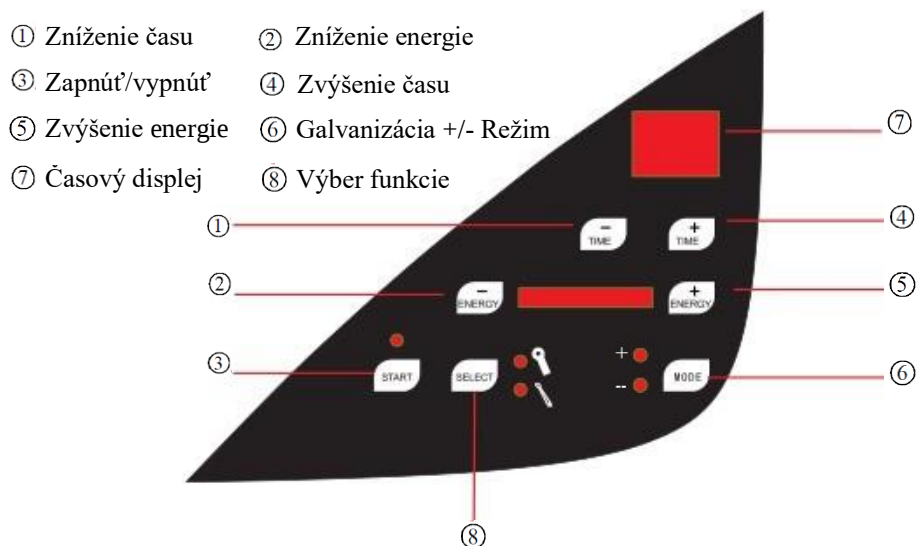

Prevádzka

※ Ozonizér

1. Energia by nemala byť príliš vysoká, aby sa zabránilo akémukoľvek zraneniu, ani nie príliš nízka na oslabenie výsledku liečby.
2. Na odstránenie škvŕny, musíte elektródu presunúť na škvrnu, potom uvidíte ubúdajúci melanín. Drobné škvŕny je možné odstrániť po jednej liečbe a na väčšie budú potrebné 2-3 liečby.

※ Galvanizácia

1. Vložte zápornú kovovú tyč do ruky klienta.
2. Použite vhodnú ampulku na kožu klienta schopnú disociácie iónov.
Potom gázou dostatočne navlhčíte tvár vodou, aby ste mohli vykonať ionoforézu. (Navlhčená gáza zostane na tvári klienta počas liečby)
3. Umiestnite Galvanizačnú elektródu na čelo klienta:
4. Zatlačte tlačidlo ⑥ a vyberte "+" pre odvedenie / "-" pre privedenie
5. Zvýšte / znížte energiu na 10 úrovniach pomalým stlačením tlačidla ⑤ / ②, čas liečby asi 4-6 minút.
6. Po liečbe vypnite napájanie a odoberte galvanickú hlavu od klienta.

※ Prevádzka

1. Zapojte do zásuvky, ⑦ sa zobrazí ako 30 (minút) a bliká druhá bodka
2. Pre výber funkcie Vysoká frekvencia / Galvanizácia stlačte ⑧
3. Stlačením tlačidla ① / ④ nastavte dobu prevádzky
4. Zatlačte ⑤ / ② pre nastavenie energie.
5. Tlačidlom vyberte "+" pre odvedenie / "-" len pre privedenie keď je zapnutá Galvanizácia.

Poznámky

1. Ak kozmetik vykonáva zákrok sterilizovanými rukavicami, ruky by sa mali najprv vyčistiť a dezinfikovať alkoholom
2. Elektródy by mali byť sterilizované, udržiavané čisté a suché a pripevnené na rukoväť
3. Pred liečbou dezinfikujte liečenú časť tela klienta alkoholom
4. Potierajte túto časť anestetikom po dobu 3 minút a potom začnite liečbu
5. Počas operácie nezostávajú príliš dlho na ošetrovanej oblasti, aby ste sa vyhli jazvám
6. Pred operáciou si zložte všetky kovové časti (náušnice, náhrdelník atď.)