


RUČNÝ VYSOKOFREKVENČNÝ NÁSTROJ

NÁVOD NA POUŽITIE




Trubica hrebeň

Doplňky

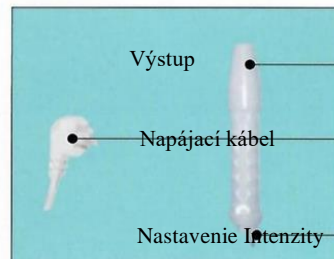

Držiak

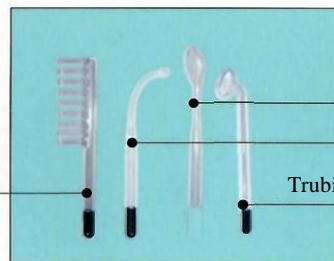

Sklenená trubica

Hlavné pokyny

Vysokofrekvenčná elektroterapia je dôležitým nástrojom pre krásu. Je to práve cez sklenenú elektródovú trubicu, ktorá produkuje vysoký frekvenčný prúd a aplikuje sa na tvár, čím dosahuje výsledok liečby.

1. Pomáha upokojiť nervy a má analgetickú funkciu.
2. Vytvára ozón na sterilizáciu, môže pomôcť ranu liečiť a obmedziť póry.
3. Zlepšuje sekréciu, hodnotu pH, spôsobuje, že koža sa neutralizuje.
4. Urýchľuje krvný obeh a zlepšuje metabolizmus.
5. Má funkciu anti-starnutia, proti tvorbe vrások a napínania.

Postup pri používaní:

1. Nepriama metóda:
 - (1). Zaskrutkujte sklenenú trubicu do držiaka.
 - (2) . Prosím, požiadajte klienta, aby podržal sklenenú trubicu pri dotyku s trochou mastencového prášku. Zapnite prístroj a elektrina sa dostane cez ruky do celého tela.
 - (3) . Kozmetici robia masáž na tvári klienta od krku po bradu a z okraja očí po čelo.
 - (4) . Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Uistite sa, že prístroj je vypnutý a vyberte sklenenú trubicu z držiaka. Táto metóda je vhodná na suchú pokožku a zostarnutú pokožku.
2. Priama metóda:
 - (1). Natrite prosím esenciu a krém najprv na tvár a potom kozmetik drží kovový panel, a umiestni sklenenú trubicu na tvár klienta. Zapnite prístroj.

(2) . Masírujte so sklenenou trubicou, akoby v tvare „Z“ alebo špirálovite tvár klienta, vykonajte liečbu nasledovne, čelo-■ nos - * - pravá strana tváre- • -brada ~ * ľavá strana tváre - * nos-* čelo.

(3) . Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Uistite sa, že prístroj je vypnutý a vyberte sklenenú trubicu z držiaka. Táto metóda je vhodná na mastnú pokožku.

3. Iskrivá metóda:

(1). Zakryte oči klienta kusom mokrej látky a dotýkajte sa tváre so sklenenou trubicou na strane zápalu. Po prvýkrát by mala byť liečba kratšia ako 10 sekúnd.

(2). Je to normálne, ak sa tam vyskytnú iskry, pri dotyku tváre sklenenou trubicou.

(3). Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Uistite sa, že prístroj je vypnutý a vyberte sklenenú trubicu z držiaka.

Táto metóda je vhodná na kožu s boľavými miestami, zápalom a ranami.

4. Metóda starostlivosti o vlasy:

(1). Použite hrebeňovú trubicu spolu s epilátorom.

(2). Hrebeňovou trubicou pohybujte v smere rastu vlasov.

(3) . Nastavte, prosím, intenzitu na 0. Uistite sa, že prístroj je vypnutý a vyberte sklenenú trubicu z držiaka.

Táto metóda je na stimuláciu povrchu kože, redukuje folikulitídu a zlepšuje zdravý rast vlasov.

Upozornenia:

1. Citlivú pokožku prosím zakryte kusom jemnej látky, aby ste sa vyhli nadbytočnej stimulácii.
2. Neumiestňujte na jedno miesto dlhšie ako na 10 sekúnd.
3. Táto liečba je nevhodná pre tehotné ženy a ľudí s kardio stimulátorom.
4. Pred zapnutím prístroja sa uistite, že je na zariadení nasadená sklenená trubica. Po dokončení upravte intenzitu na -O".
5. Koža s pehami a škvŕnami je na túto liečbu nevhodná.

Zoznam príslušenstva

Názov položky	Jednotka	Množstvo	Poznámky
Držiak	Súprava	1	
Sklenená trubica	Súprava	1	So 4 kusov
Pokyny	Kus	1	

Technická norma:

Napájanie: ACQ110V Q220V Pracovná 230V Q240V

frekvencia: 50-60HZ Výkon: 10W.

Rozmery: 33x21x6CM Hmotnosť:

1 KG

Dôležité Bezpečnostné Informácie

1. Prosím, nerozoberajte prístroj ani sa nepokúšajte urobiť nijakú inú operáciu, ktorá nebola uvedená v našom manuáli. Všetky opravné práce by mal vykonávať náš uznaný profesionálny personál
2. Neskladajte ani neupravujte toto zariadenie, ak ste blízko pri vode, alebo máte ruky mokré. Dávajte si pozor, aby ste naň nevyliali tekutinu.
3. Vytiahnite, prosím, zástrčku zo zásuvky, ak nastanú nižšie uvedené podmienky. A obráťte sa na profesionálny servis.
 1. Prístroj bol poliaty kvapalinou
 2. Prístroj má abnormálny zápach, dymí sa z neho, alebo vydáva hlasný a silný hluk.
 3. Kábel je zlomený
 4. Prístroj spadol a rozbil sa
4. Prosím, neukladajte nič na káble, neumiestňujte prístroj na také miesto, kde niekto môže stúpiť na kábel.
5. Po použití pre vašu bezpečnosť vytiahnite napájací kábel.
6. Nevkladajte nič do konektora jack príslušenstva, inak to môže spôsobiť požiar alebo dotyk elektriny. Ak niečo do prístroja spadne, prosím, nevyberajte to sami, okamžite kontaktujte distribútora alebo našu spoločnosť.
7. Prosím, nedávajte prístroj na čokoľvek, čo nemôže stáť, stabilne, vyhnite sa tomu, aby sa prevrátil a poškodil.
8. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť informácie v tomto návode bez oznámenia! Riad'te sa vyššie uvedenými pokynmi.

