

Kozmetický prístroj AM 60 -

Mikrodermabrázia

Predslov

Mikrokryštálovú dermabráziu najprv navrhol Mattioli z talianskej Florencie a má už viac ako 20-ročnú históriu. Tento druh technológie sa pri prvých použitiach dodával len dermatológom a lekárom, no postupne ho začali využívať aj kúpeľné domy a salóny krásy a bola označovaná za najlepšiu metódu lekárskej krásy. Táto metóda sa v Európe úspešne rozvíja už niekoľko rokov, lieči tisíce pacientov a má mimoriadne uspokojivý účinok.

Teraz vám chceme predstaviť **diamantovú dermabráziu**, čo je kreatívne vylepšenie mikrokryštálovej dermabrázie. Diamantová dermabrázia poskytuje nechirurgický postup úpravy pokožky použitím sterilných diamantových hláv na obrusovanie alebo odieranie vrchnej vrstvy pokožky a následné vysávanie častíc spolu so všetkými nečistotami a odumretou kožou späť hore.

Táto procedúra odstraňuje zvyšky kože, nedokonalosti, škvrny, vrásky a nežiaducu pigmentáciu na pokožke. Striedme používanie diamantovej dermabrázie spolu s pleťovými produktmi, ktoré prenikajú cez vrchnú vrstvu pokožky až na úroveň derma, pomáha doplniť prirodzené živiny, obnoviť bunkovú aktivitu a podporovať zdravie pokožky. Výsledkom po ošetrení Micro Dermabráziou je zvyčajne zdravá, žiariaca a krásna pleť.



*** Príprava pred ošetrením

1. Konzultácia zahŕňa vyšetrenie kože, plán liečby.
2. Operatér by mal používať vinylové rukavice a masku na tvár.
3. Na mastnú alebo aknóznu pleť možno pred ošetrením použiť naparovač, prípadne pred čistiacim prostriedkom naniest' odmasťovacie mlieko.
4. Očistite pleť čistiacim gélom alebo vodou, potom utrite vatovým tampónom. Nechajte pleť vyschnúť.

Návod na použitie pre diamantovú

dermabráziu

1. Zatlačte na pohyblivý krúžok medenej dýzy na nastavci a vytiahnite vákuovú hadicu veľkosti 6x4. Potom zatlačte čierny plastový krúžok na vákuovej hadici.
2. Naneste kvapku krému alebo mlieka na dýzu vákuovej hadice, zatlačte pohyblivý krúžok a zasuňte vákuovú hadicu až na doraz.
3. Vložte vatový tampón do diamantovej hlavice a potom diamantovú hlavicu pripevnite na rukoväť. Po každom ošetrení odstráňte vatový tampón.
4. Zapnite hlavný vypínač.
5. Upravte intenzitu vákua pomocou regulátora vákua podľa nasledujúcej referenčnej tabuľky, intenzita sa zobrazí na ukazovateli vákua a skontrolujte pohodlie klienta.

Odporúčaná intenzita vákua na ošetrovanej ploche

Oblasť ošetrenia	Normálna pleť (inHg)	Citlivá pleť (inHg)
Tvár	12-22	8-12
Čelo	12-22	10-12
Hrudník	15-20	15-18
Nos	10-15	10-14
Krk	18-18	10-15
Okolie očí	8-12	8-10

Tabuľka harmonogramu liečby


Liečba	Frekvencia (dní)	Celkový počet návštev
Peeling na tvár	6-10	3-5
Jemné línie	7-13	6-8
Krk	12-14	3-5
Jazvy po akné	7-12	8-10
Hyperpigmentácia	7-12	8-10

6. Použite naklonenú oblasť nastavca na kontakt s povrchom pokožky. Pokračujte pomalým posuvným pohybom. Nedržte nastavec na jednom mieste príliš dlho, poškodíte tým pokožku.
7. Pomaly upravte prietok kryštálov pomocou regulátora vákua z minima na maximum. Pri bežnom používaní nenastavujte prietok na maximum, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Je to pre lepšiu

intenzitu pohodlia.

8. Jemne natiahnite kožu palcom a prstom a 2 až 3-krát posuňte nadstavec po ošetrovanej oblasti. Potom znova prekrižte v rôznych smeroch, aby ste predišli pruhovaným čiaram ako na referenčnom obrázku. Ťahy štetcom alebo leštiace pohyby možno použiť na rôznych miestach.

DIAGRAM NAVRHOVANÝCH POHYBOV A OBLASTÍ PRE DERMABRÁZU

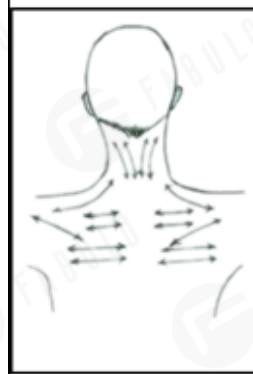

*** Postupujte podľa smeru šípok.**

9. Po ošetrení odstráňte všetku zvyšnú odumretú pokožku mäkkou kefkou a opláchnite vlhkou špongiou alebo vlhkým studeným uterákom.

10. Nechajte pokožku zaschnúť a potom naneste požadovaný pleťový produkt.

11. Na čistenie diamantovej hlavy použite zubnú kefku alebo vatový tampón navlhčený trochou alkoholu, aby ste zotreli špinu a potom použite UV svetlo alebo vysokú teplotu na sterilizáciu.

Bezpečnostné upozornenie

Dôležité upozornenie pred použitím tohto prístroja:

Nikdy neprevádzkujte toto zariadenie na človeku, ktorý má alebo trpí nasledujúcimi zdravotnými problémami popísanými nižšie.

(Salón alebo operatér môže zvážiť, či klient podpíše výnimku v tom zmysle, že nemá žiadne vážne zdravotné ťažkosti.)

1. Ochorenie srdca
2. Srdcový šelest alebo nepravidelný srdcový tep
3. Má kardiostimulátor alebo iný typ vyrovnávača srdcovej frekvencie.
4. Tehotenstvo
5. Epilepsia
6. Alkoholizmus
7. Vredy
8. Ochorenie žalúdka, čriev, pečene alebo pankreasu.
9. Rakovina prsníka.
10. Prebiehajúca liečba akejkoľvek formy rakoviny.

11. V minulom roku podstúpil veľkú operáciu.

12. Astma

13. Prechladnutie, chrípka alebo podráždený žalúdok

14. Akékoľvek vážne ochorenie alebo choroba, ktoré nie je uvedené vyššie.

Nepoužívajte v týchto oblastiach:

1. Citlivá pokožka
2. Kožná vyrážka
3. Poškodená, zapálená alebo infikovaná pokožka.
4. Chirurgická jazva, ktorá nie je staršia ako 12 mesiacov.
5. Opuchnutá pokožka.
6. Sondy nemôžu smerovať do očnej gule.
7. Pohlavné orgány.

1. Liečbu začnite vždy opatrne a pozorujte účinky na dotyk a vzhľad pokožky. Príliš vysoký alebo príliš veľký vákuový výkon môže spôsobiť zápalovú reakciu.

2. Po liečbe sa môže vyskytnúť edém a erytém, ktoré však za niekoľko hodín ustúpia.

3. Príliš agresívne techniky môžu spôsobiť mierne odlupovanie počas nasledujúcich 3-4 dní. Epiderma, ktorá je liečená príliš agresívne, môže viesť ku krvácaniu v povrchovej derme.

4. Diamantová dermabrázia by sa nemala používať na citlivé oblasti, ako sú očné viečka. Očné viečka by mali byť počas procedúry vždy zatvorené a môžu byť pokryté vlhkými vatovými tampónmi.

5. Nasledujúce oblasti sa považujú za nevhodné na liečbu: Nádor kože, materské znamienka, angióm, pery, oči, herpes, rakovina kože a pečene škvryny.

6. Neupravujte ani sa nepokúšajte prístroj opravovať, kontaktujte technika kvôli údržbe.

Riešenie problémov

Ak prístroj nefunguje správne, pred požiadanim o údržbu vykonajte tieto postupy.

1. Nízky sací výkon / nízky vákuový tlak:

Znova skontrolujte, či je vákuová hadica dobre pripojená k zásuvke a potom k nastavcu. Potom otočte regulátor vákua na maximum a potom spustíte diamantovú dermabráziu a potom prstom zablokujte dieru na nastavci. Za normálnych okolností môže vákuový merač namerať 24 palcov Hg.

**** Skontrolujte O krúžok v diamantových perách a O krúžok v zásuvke!**

Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte svojho distribútora. Neotvárajte prístroj sami bez pokynov technika.

2. Žiadna odozva pri zapnutí napájania.

Vymeňte, prosím, poistku. A správne pripojte napájací kábel. Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte svojho distribútora.

Potreby a príslušenstvo

Diamantový prístroj na dermabráziu x 1

Vákuová hadica z PVC 6*4 x 1

Diamantové pero x 2

Krabička na perá a pena x1

Diamantová hlava x 9

Krabica na hlavy a pena 1

O-krúžok x 2

Bavlnený filter x 1 balenie

Napájací kábel x 1

Poistka x2

Manuál x 1

Technické údaje:

Napájanie: 240V/50/60Hz

220V/50/60Hz

115V/60Hz

Výkon: 65 VA Poistka: 2A