

Kozmetický prístroj Mikrodermabrázia a celulitída

BeautyOne AM60

NÁVOD NA POUŽITIE



CE

1. Princíp fungovania zariadenia

Celulógia je liečba kombinujúca mechanickú masáž s podtlakom s súčasným sťahovaním kožných záhybov (odsávanie) a valčekovaním pohyblivými valčkami. Vďaka tejto aplikácii pôsobí celulógia na kožu a podkožné tukové tkanivo a túto metódu možno zaradiť medzi masáže spojivového tkaniva. Táto masáž sa často označuje aj ako lipomasáž. Výsledkom ošetrovania je odstránenie celulitídy rozkladom tukových buniek a viditeľné zmenšenie obvodu tela. Jazvy a strie sa viditeľne zmenšujú. V dôsledku stimulácie mikrocirkulácie dochádza k zníženiu opuchov. Počas celulogie sa celé telo okrem prs masíruje pomocou špeciálnej hlavice v tvare pohára vybavenej 6 pohyblivými valčkami napojenými na odsávaciu hadičku. Masáže sa vykonávajú najmä v oblastiach postihnutých celulitídou. Najčastejšie sa masírujú stehná, brucho a zadok. Ošetrovania sú úplne neinvazívne a bezpečné a podporujú prirodzené procesy v tele.

2. Zariadenie sa skladá z:

- Vlastného zariadenia AM60
- Ošetrovacích hlavíc 5 ks
- Silikónovej hadičky 2 ks

Nádobky filtračného systému

- Napájacieho kábla
- Záručného listu

Návod na použitie



Obrázok 1: zariadenie AM60




Obrázok 2: ošetrovacie hlavice



Obrázok 4: silikónová hadička



Obrázok 3: nádobka filtračného systému

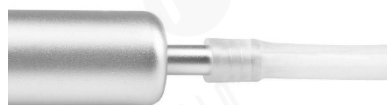

Obrázok 5: pripojenie hadičky

3. Inštalácia zariadenia

1. Pripojte napájací kábel k zariadeniu a potom do elektrickej zásuvky.
2. Pripojte silikónovú hadicu k zariadeniu a potom k nádobe filtračného systému.
3. Pripojte silikónovú hadicu k filtračnej hlavici vykonaním polovičnej otáčky a potom pripojte druhú časť silikónovej hadice k nádobe filtračného systému.
4. Zapnite zariadenie stlačením červeného tlačidla na hornom kryte pláštá zariadenia.
5. Pomocou potenciometra zmeňte sací výkon zariadenia podľa vykonávaného ošetrovania.
6. Vypnite zariadenie pomocou červeného tlačidla a odpojte ho od elektrickej siete.

4. Čistenie zariadenia

Po každom zákroku by sa mala hlavica, hadička a filter očistiť od všetkých zvyškov prípravku použitého počas zákroku.

5. Určenie hlavíc



1. Hlavica na jazvy a strie Ø15 mm
2. Hlavica na brucho a ramená Ø 25 mm
3. Hlavica na brucho a ramená Ø 35 mm
4. Hlavica na stehná a zadok Ø 55 mm
5. Hlavica na stehná a zadok Ø 80 mm

6. Odporúčania týkajúce sa zákroku

- odstránenie celulitídy
- spevnenie pokožky
- modelovanie postavy
- stimulácia krvného obehu
- vyhladzovanie strií a jaziev
- zníženie opuchov
- príprava na liposukciu
- terapia proti starnutiu
- podporná liečba jaziev, popálenín, opuchov
- relaxačné ošetrenia

7. Kontraindikácie

- rakovina
- tehotenstvo
- zápal kože
- mechanické poškodenie kože
- náchylnosť na krvácanie a petechie (modriny)
- porušené kapiláry
- obehová nedostatočnosť
- horúčka, slabosť a kachexia
- pokročilá arteriálna hypertenzia

Mikrodermabrázia

Predslov

Návod na použitie pre diamantovú dermabráziu

1. Zatlačte na pohyblivý krúžok medenej dýzy na nastavci a vytiahnite vákuovú hadicu veľkosti 6x4. Potom zatlačte čierny plastový krúžok na vákuovej hadici.
2. Naneste kvapku krému alebo mlieka na dýzu vákuovej hadice, zatlačte pohyblivý krúžok a zasuňte vákuovú hadicu až na doraz.
3. Vložte vatový tampón do diamantovej hlavice a potom diamantovú hlavicu pripevnite na rukoväť. Po každom ošetroaní odstráňte vatový tampón.
4. Zapnite hlavný vypínač.
5. Upravte intenzitu vákua pomocou regulátora vákua podľa nasledujúcej referenčnej tabuľky, intenzita sa zobrazí na ukazovateli vákua a skontrolujte pohodlie klienta.

Odporúaná intenzita vákua na ošetrovanej ploche


Oblas ošetrenia	Normálna ple (inHg)	Citlivá ple (inHg)
Tvár	12-22	8-12
elo	12-22	10-12
Hrudník	15-20	15-18
Nos	10-15	10-14
Krk	18-18	10-15
Okolie o í	8-12	8-10

Tabu ka harmonogramu lie by

Lie ba	Frekvencia (dní)	Celkový po et návštev
Peeling na tvár	6-10	3-5
Jemné línie	7-13	6-8
Krk	12-14	3-5
Jazvy po akné	7-12	8-10
Hyperpigmentácia	7-12	8-10

6. Použite naklonenú oblasť nastavca na kontakt s povrchom pokožky. Pokračujte pomalým posuvným pohybom. Nedržte nastavec na jednom mieste príliš dlho, poškodíte tým pokožku.
7. Pomaly upravte prietok kryštálov pomocou regulátora vákua z minima na maximum. Pri bežnom používaní nenastavujte prietok na maximum, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Je to pre lepšiu intenzitu pohodlia.
8. Jemne natiahnite kožu palcom a prstom a 2 až 3-krát posuňte nastavec po ošetrovanej oblasti. Potom znova prekrížte v rôznych smeroch, aby ste predišli pruhovaným čiaram ako na referenčnom obrázku. Ťahy štetcom alebo leštiace pohyby možno použiť na rôznych miestach.

* Postupujte pod a smeru šípok.

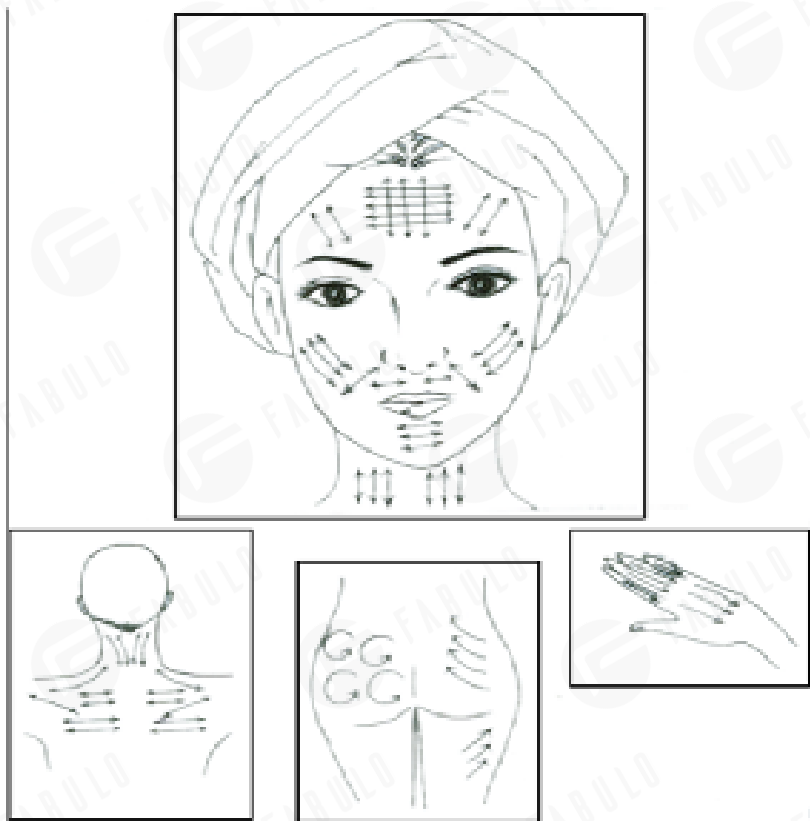

9. Po ošetrení odstráňte všetku zvyšnú odumretú pokožku mäkkou kefkou a opláchnite vlhkou špongiou alebo vlhkým studeným uterákom.

10. Nechajte pokožku zaschnúť a potom naneste požadovaný pleťový produkt.

11. Na istenie diamantovej hlavy použite zubnú kefku alebo vatový tampón navlh ený trochu alkoholu, aby ste zotreli špinu a potom použite UV svetlo alebo vysokú teplotu na sterilizáciu.

Bezpe nostné upozornenie

Dôležité upozornenie pred použitím tohto prístroja:

Nikdy neprevádzkujte toto zariadenie na človeku, ktorý má alebo trpí nasledujúcimi zdravotnými problémami popísanými nižšie. (Salón alebo operátor môže zvážiť, či klient podpíše výnimku v tom zmysle, že nemá žiadne vážne zdravotné ťažkosti.)

1. Ochorenie srdca
2. Srdcový šelest alebo nepravidelný srdcový tep
3. Má kardiostimulátor alebo iný typ vyrovnávača srdcovej frekvencie.
4. Tehotenstvo
5. Epilepsia
6. Alkoholizmus
7. Vredy
8. Ochorenie žalúdka, čriev, pečene alebo pankreasu.
9. Rakovina prsníka.
10. Prebiehajúca liečba akejkoľvek formy rakoviny.
11. V minulom roku podstúpil veľkú operáciu.
12. Astma
13. Prechladnutie, chrípka alebo podráždený žalúdok
14. Akékoľvek vážne ochorenie alebo choroba, ktoré nie je uvedené vyššie.

Nepoužívajte v týchto oblastiach:

1. Citlivá pokožka
2. Kožná vyrážka
3. Poškodená, zapálená alebo infikovaná pokožka.
4. Chirurgická jazva, ktorá nie je staršia ako 12 mesiacov.
5. Opuchnutá pokožka.
6. Sondy nemôžu smerovať do očnej gule.
7. Pohlavné orgány.

1. Liečbu začnite vždy opatrne a pozorujte účinky na dotyk a vzhľad pokožky. Príliš vysoký alebo príliš veľký vákuový výkon môže spôsobiť zápalovú reakciu.
2. Po liečbe sa môže vyskytnúť edém a erytém, ktoré však za niekoľko hodín ustúpia.
3. Príliš agresívne techniky môžu spôsobiť mierne odlupovanie počas nasledujúcich 3-4 dní. Epiderma, ktorá je liečená príliš agresívne, môže viesť ku krvácaniu v povrchovej derme.
4. Diamantová dermabrázia by sa nemala používať na citlivé oblasti, ako sú očné viečka. Očné viečka by mali byť počas procedúry vždy zatvorené a môžu byť pokryté vlhkými vatovými tampónmi.
5. Nasledujúce oblasti sa považujú za nevhodné na liečbu: Nádor kože, materské znamienka, angióm, pery, oči, herpes, rakovina kože a pečeneňové škrvy.

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Zariadenie môže prevádzkovať len kvalifikovaný kozmetický personál, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom počas ošetrenia.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa nesmie používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokrymi rukami - do zariadenia sa nesmie dostať žiadna kvapalina.
4. Okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovanú servisnú spoločnosť
 - a) do zariadenia sa dostala kvapalina,
 - b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla,
 - d) spotrebič bol prevrátený alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble nepokladajte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde môže niekto stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so zariadením.
7. Do otvoru zariadenia nič nekladajte. Ak sa do otvoru spotrebiča dostane cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a obráťte sa na distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Zariadenie sa môže poškodiť, ak spadne.
9. V záujme zaručenia životnosti spotrebiča sa odporúča dodržiavať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade existuje riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia zariadenia.

POZNÁMKY:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na hranie deťom. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby s nedostatočnými znalosťami o používaní zariadenia.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa malo zariadenie používať a skladovať mimo dosahu detí.