



Brand for Beauty

Návod na použitie výrobku

Model: HY-M018

HY-M018

Celý názov: Lymfodrenážny prístroj Beautyfor® Max

I. Zhrnutie:

Tento kozmetický prístroj, ktorý kombinuje funkcie zoštíhľovania, dekompresie a detoxikácie, je nevyhnutným vybavením moderného kozmetického salónu, zlepšuje starú prax len 7 vzduchových vankúšov a jednobodového ošetrenia.


Tento nástroj obsahuje 5 častí, celkovo má 24 kusov vzduchových vankúšov, všetky vzduchové vankúše medzi pravou a ľavou stranou sú symetrické, jeden vzduchový vankúš je v oblasti pásu a druhý je v oblasti žalúdka. Vankúše v hornej a dolnej a pravej a ľavej časti nôh sú symetricky umiestnené. Všetky vzduchové vankúše môžu vyplniť tú časť, ktorá potrebuje schudnúť.

II. Funkcie produktu:

1. Detoxikácia ;
2. Formovanie postavy ;
3. Chudnutie ;
4. Stimulácia lymfatického systému ;
5. Dekompresia a uvoľnenie tela ;
6. Zníženie zápalu buniek a pokožky ;

Toto zariadenie Vám pomôže uvoľniť sa a schudnúť, zároveň bude formovať postavu. Pravidelný pohyb tlaku vzduchu podporuje močenie, vyprázdňovanie a tok lymfy; urýchľuje krvný obeh; znižuje množstvo škodlivín v tele a potom redukuje melanín a škvvrny na koži.


III. Schéma panelu:

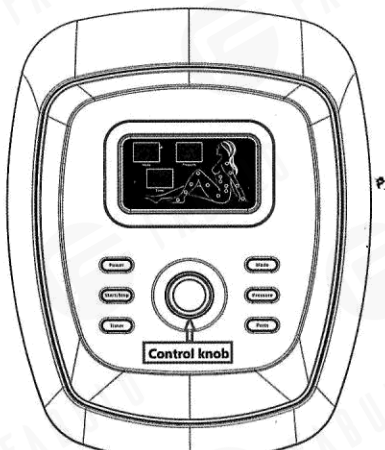


V. Návod:

1. Najprv pripojte napätie 220 V, vtedy je prístroj v pohotovostnom režime, na obrazovke „Mode“, „Pressure“ a „Timer“ sa zobrazí znak „_ _ _“.
2. Stlačte tlačidlo „Power“, na obrazovke „Mode“, „Pressure“ a „Timer“ sa modrým svetlom zobrazí číslo. Existujú dva pracovné režimy:
 - 1) Automatický režim (predvolený):
 - A. Stlačte tlačidlo „Pressure“, obrazovka „Pressure“ bude blikať, potom otočte ovládač doprava a nastavte tlak od 1 do 3 (Malý, Stredný a Veľký).
 - B. Stlačte tlačidlo „Timer“, obrazovka „Timer“ bude blikať, potom otočte ovládač doprava a nastavte čas (1-60 minút)

IV. Rozložená mapa vzduchových vankúšov vo výbave (celkom 24ks):

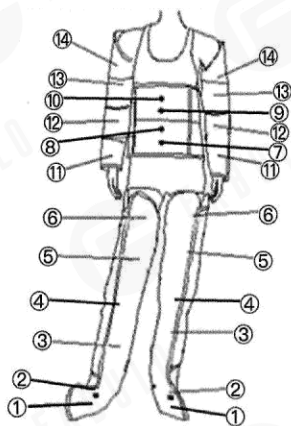

- C. Stlačte tlačidlo „Mode“, obrazovka „Mode“ bude blikať, potom otočte ovládač doprava, aby ste vybrali spôsoby prevádzky (Od 1 do 6 spôsobov), pozrite si, prosím, nákras, ktorý ukazuje, ako sa vzduchové vankúše budú chvieť od nôh po žalúdok:

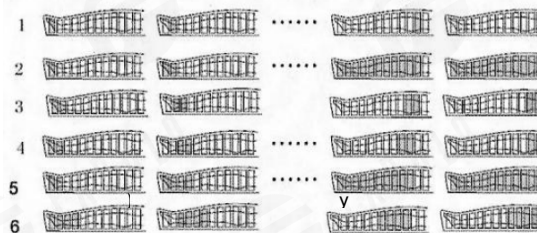

- D. Keď skončíte vyššie uvedené body A, B, C, stlačte tlačidlo „Start/stop“ na spustenie masáže, ktorú ste si vybrali.
2. Režim manuálnej prevádzky: Stlačením tlačidla „Power“ zapnete prístroj a stlačte tlačidlo „Mode“ a potom otáčajte ovládací gombík vpravo, kým sa na obrazovke „Mode“ nezobrazí „hd“, čo znamená, že prístroj je v režime manuálnej prevádzky, potom môžete stlačiť tlačidlo „Parts“ - svetlo zhasne a môžete otáčať ovládací gombík doprava, aby ste si vybrali, ktorá časť sa má masírovať, keď ste si vybrali časť, ktorú chcete, stlačte tlačidlo „Parts“ ešte raz na potvrdenie. Ak chcete naraz niekoľko častí tela, potvrdte časť jednu po druhej tlačidlom „Parts“.
- Po dokončení vyššie uvedeného stlačte tlačidlo „Pressure“ a tlačidlo „Timer“ na výber požadovaného tlaku a času, potom stlačte tlačidlo „Start/stop“ na spustenie zvoleného spôsobu masáže.
3. Keď je prístroj v prevádzke, ale chcete zmeniť automatický režim na manuálnu prevádzku (alebo opačne), stlačte tlačidlo „Start/Stop“ na zastavenie prístroja a potom podľa potreby zopakujte krok 1) alebo 2).
4. Keď je prístroj v prevádzke, môžete nastaviť iba tlačidlo „Pressure“ a „Timer“. Ale tlačidlo „Mode“ je možné nastaviť až potom, čo prístroj prestane pracovať.
5. Prístroj automaticky prestane pracovať po uplynutí vami zvoleného času. Ak chcete postup zastaviť, stlačte tlačidlo „Start/Stop“ na zastavenie prevádzky prístroja a vytiahnutím zástrčky vypnete napájanie.

VI. Návod na ovládanie času:

- Typ 1: Nadváha – vyberte 1. spôsob „Automatického režimu“ a odporúčaný čas je 60 minút.
- Typ 2: Stredne tučný – vyberte 1. spôsob a 2. spôsob „Automatického režimu“ a navrhovaný čas je 30-45 minút pre oba spolu.
- Typ 3: Málo tučný -- Zvoľte 1. spôsob „Automatického režimu“ na 20 minút, potom zvoľte „Režim manuálnej prevádzky“ na 15 minút,
- Typ 4: Udržiavanie štíhlosti – vyberte si ľubovoľný spôsob od 1. po 6. spôsob „Automatického režimu“ na 20-30 minút, pričom striedajte jeden alebo viacero spôsobov)
- Typ 5: Čistenie lymfatického systému – vyberte si 3. spôsob „automatického režimu“ na 20-35 minút.

VII. Vhodný pre:

1. Ľudí, ktorí chcú schudnúť (môže to pomôcť schudnúť, ale nevhodia veľa, ak budú používať iba toto zariadenie)
2. Ľudí, ktorí chcú chudnúť po narodení dieťaťa.
3. Ľudí, ktorí majú zápchu alebo pomalý obeh lymfy, normálne budú trpieť vyrážkami a škvrmami.

VIII. Ľudia, pre ktorých prístroj nie je vhodný :

- Ľudia s nákazlivými chorobami.
- Ľudia s akútnymi ochoreniami.
- Ľudia so srdcovým ochorením.
- Ľudia s hypertenziou, mozgovým infarktom alebo vo vážnom stave.
- Hemoragické ochorenie alebo zranenie.
- Ženy s menštruáciou nesmú používať časť na žalúdku.
- Nie je vhodný pre tehotné ženy.

IX. Technické údaje:

Napájacie napätie: 220V Frekvencia napájania: 50HZ
Menovitý výkon: 120 W Menovitý prúd: 0.15A

