SILVERFOX

F-311B / F-312B / F-313B / F-314B / F-315B / F-316B / F-317B / F-318B / F-319B

Kozmetický prístroj

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo vylepšovať dizajn a upravovať výrobky bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

O tomto návode **1**

Bezpečnostné pokyny **1**

F-311B Ultrazvuková špachtľa – popis a parametre **2/3**

F-312B Ultrazvuk – popis a parametre **4/5**

F-313B Galvanika – popis a parametre **6/7**

F-314B Vysoká frekvencia – popis a parametre **8/9**

F-315B Rotačná kefka – popis a parametre **10/11**

F-316B Vákuum a sprej – popis a parametre **12/13**

F-317B Rádiofrekvencia – popis a parametre **14/15**

F-318B Studené a teplé kladivko – popis a parametre **16/17**

F-319B Diamantová dermabrázia – popis a parametre **18/19**

Riešenie problémov **20**

O tomto návode

Tento návod slúži výhradne ako referencia pre obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa návod použije na iné účely, spoločnosť SILVERFOX nenesie za vzniknuté následky žiadnu zodpovednosť. Všetky informácie v tomto návode sú chránené autorským právom a bez písomného súhlasu spoločnosti SILVERFOX ich nie je dovolené kopírovať ani prekladať, a to ani sčasti.

Bezpečnostné pokyny


Pre správne a bezpečné používanie výrobku si pred použitím prečítajte všetky pokyny!
Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia!

⚠	**Varovanie!**	**Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade nedodržania viesť k vážnemu ohrozeniu života.** • Tento výrobok je určený len pre kozmetičky s odbornou kvalifikáciou. • Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni – hrozí porucha a nebezpečenstvo. • Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých látok (napr. alkohol, riedidlo, benzín, odlakovač, spreje a pod.). • Výrobok nepoužívajte v týchto prípadoch: keď je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo sa prehrieva; keď je zástrčka v zásuvke uvoľnená. • Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami a ani takto výrobok nepoužívajte. • Uistite sa, že prevádzkové napätie zodpovedá menovitému napätiu výrobku. • Pred použitím skontrolujte, či sú zástrčka a konektor napájacieho kábla úplne zasunuté, aby nedošlo k nebezpečenstvu. • Ak výrobok nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. • Pravidelne čistite prach nahromadený na zástrčke a konektore napájacieho kábla, aby vplyvom vlhkosti, prachu a ďalších faktorov nedošlo k poruche izolácie. • Používajte výhradne napájací kábel dodaný k tomuto výrobku. Nepoužívajte ho so žiadnym iným spotrebičom. • Napájací kábel neomotávajte okolo výrobku – môže sa zdeformovať a poškodiť. • Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom výrobok používať. • Výrobok sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte. Ak je potrebná oprava, obráťte sa na výrobcu, zástupcu alebo odborný servis, aby nedošlo k nebezpečenstvu. • Ak je zástrčka poškodená, obráťte sa na distribútora, servisné stredisko alebo osobu s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami. • Výrobok používajte výhradne na účel uvedený v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
⚠	**Pozor!**	**Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže v prípade nedodržania viesť k poraneniu osôb.** • Obsluha musí pri používaní venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti osôb a zariadenia. • Ak výrobok nepracuje správne, okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na výrobcu alebo predajcu. • S výrobkom a príslušenstvom zaobchádzajte šetrne. • S obalovým materiálom zaobchádzajte zodpovedne, aby nedošlo k nehodám, napríklad k uduseniu detí; uchovávajte ho mimo dosahu detí.

◆ F-311B Ultrazvuková špachtľa



1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

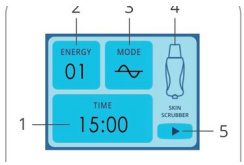

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Voľba režimu
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Antistatický náramok

Postup použitia

1. Špachtľu a antistatický náramok zasuňte do príslušných konektorov kozmetického prístroja. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na nepretržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Podľa potreby si môžete zvoliť rôzne režimy – stlačením tlačidla „Mode switch“ vyberiete vhodný výstupný režim sondy: nepretržitá vlna, prerušovaná vlna a zmiešaná vlna.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Pred stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ nasaďte klientovi antistatický náramok. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
5. Ak sa počas ošetrenia antistatický náramok zloží, prístroj automaticky prestane pracovať.
6. Ak chcete prístroj počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
7. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite špachtľu a antistatický náramok 75 % alkoholom a uložte ich na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

Pri bežnom stave pokožky by ošetrenie nemalo presiahnuť 15 minút.

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Keď je prístroj zapnutý, nedotýkajte sa samotného výstupného konektora špachtle.
- Špachtľu neprikladajte priamo k oku.
- Použitie je zakázané u týchto osôb:
  ① alergickí klienti;
  ② popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky;
  ③ klienti so srdcovým ochorením, infekčnými ochoreniami, neurologickými ochoreniami a klienti s kovom v tele počas ošetrenia.
- Lopatku pracujúcej špachtle nenechávajte na jednom mieste pokožky, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Ak povrch pokožky nie je dostatočne hydratovaný krémom, včas ho doplňte.
- Pri práci so špachtľou dbajte na tlak a na uhol medzi špachtľou a pokožkou.
- Počas práce dbajte na spojenie medzi príslušenstvom a prístrojom. Za kábel neťahajte nadmerne, aby sa spoj neuvoľnil.
- Počas práce dbajte na to, aby prístroj nebol postriekaný vodou ani inými korozívnymi kvapalinami.
- Nepoužívajte špachtľu s deformovaným alebo poškodeným nerezovým povrchom, aby nedošlo k poraneniu pokožky.
- Pri akejkoľvek nezvyčajnej situácii kontaktujte predajcu a požiadajte o kontrolu odborný servis; kvôli oprave prístroj sami neotvárajte.


⚠ Pozor

- Špachtľu udržiavajte stále čistú a po každom použití ju vydezinfikujte 75 % alkoholom.
- Zotrvanie na jednom mieste pokožky nesmie presiahnuť 5 sekúnd.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-311B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	10W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Špachtľa × 1
	Antistatický náramok × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-312B Ultrazvuk (len na kozmetické účely)

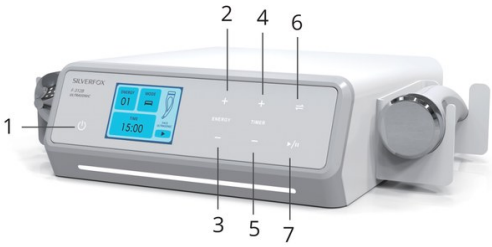

1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

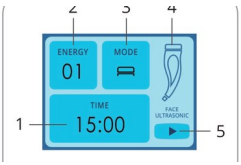

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Voľba režimu sondy
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Ultrazvukovú sondu zasuňte do príslušného konektora prístroja. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno.
   Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na výstup očnej sondy; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Podľa potreby si môžete zvoliť rôzne režimy – stlačením tlačidla „Mode switch“ vyberiete vhodný výstupný režim: pozitívny výstup, negatívny výstup a zmiešaný výstup.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
5. Ak chcete ultrazvukovú sondu počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite ultrazvukovú sondu 75 % alkoholom a uložte ju na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

Čas prispôsobte hrúbke pokožky, zvyčajne ošetrenie nepresahuje 15 minút.

Upozornenie: Kovovú časť sondy nevystavujte kontaktu s vodou

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Sondu nemierte priamo na očnú buľvu, nedotýkajte sa oka ani nemasírujte horné viečko.
- Použitie je zakázané u týchto skupín:
  ① tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom;
  ② onkologickí klienti a osoby so závažným srdcovým ochorením;
  ③ popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky;
  ④ alergickí klienti a osoby s kontaktnou dermatitídou.
- Je zakázané zapínať sondu bez kozmetickej aplikácie – hrozí obarenie vysokou teplotou a prehriatím sa skracuje životnosť sondy.
- Nerezovú sondu ani rukoväť sami nerozoberajte. Otáčaním nerezovej sondy a rukoväte sa sonda môže poškodiť.
- Táto funkcia sa nesmie používať na iné ako kozmetické účely.


⚠ Pozor

- Pred ošetrením naneste na ošetrovanú oblasť dostatok krému alebo séra, aby medzi sondou a pokožkou vzniklo dobré médium a pokožka sa nenapínala.
- Pri práci musí sonda priliehať k pokožke, aby nedošlo ku kavitácii a poškodeniu pokožky.
- Zapnutá sonda nesmie zostať mimo kontaktu s pokožkou, aby sa nepoškodila a neskrátila sa jej životnosť.
- Ak je sonda príliš horúca, popáli pokožku, preto by ošetrenie nemalo presiahnuť 15 minút; pri citlivej pokožke skráťte čas a znížte intenzitu. Predlžovanie času nezvyšuje účinok a môže byť nebezpečné. Zotrvanie na jednom mieste pokožky nesmie presiahnuť 5 sekúnd.
- Po ošetrení sa môže objaviť krátkodobé začervenanie pokožky spôsobené vibráciami sondy a tvorbou tepla, ktoré zvyšujú krvný obeh – ide o normálny stav.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-312B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	11W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 2
	Nerezová ultrazvuková plochá sonda s hrotom × 1
	Nerezová ultrazvuková plochá sonda × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-313B Galvanika

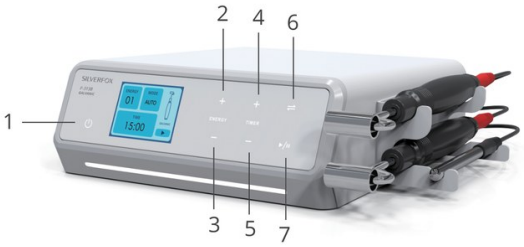

1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

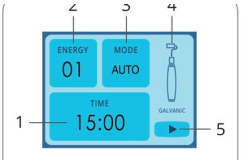

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Voľba režimu
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Galvanické príslušenstvo zasuňte do príslušného konektora prístroja. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na výstup očnej sondy; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Podľa potreby si môžete zvoliť rôzne režimy – stlačením tlačidla „Mode switch“ vyberiete vhodnú sondu na tvár alebo na oči.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
5. Ak chcete galvanickú sondu počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite galvanickú sondu 75 % alkoholom a uložte ju na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

1) Zavádzanie účinných látok: 2 minúty aniónová fáza, potom 6 minút katiónová fáza.
2) Čistiace ošetrenie: 6 minút aniónová fáza a 2 minúty katiónová fáza.

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Valčekom nepracujte priamo na očnej buľve a nedotýkajte sa ním oka.
- Výrobok je zakázané používať u týchto osôb a na týchto partiách:
  ① tehotné ženy a osoby s kovovými materiálmi v tele;
  ② alergickí a onkologickí klienti;
  ③ popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky;
  ④ osoby s rozšírenými kapilárami.
- Je zakázané zavádzať silne alkalické roztoky, aby nedošlo k negatívnemu chemickému poškodeniu.
- Táto funkcia sa nesmie používať na iné ako kozmetické účely.

⚠ Pozor

- Kyslosť a zásaditosť kozmetických prípravkov musí zodpovedať pólu valčeka. Pri kladnom póle je zavádzaná látka kyslá (+); pri zápornom póle je zavádzaná látka zásaditá (−). Ak prípravok nemá kyslosť alebo zásaditosť priamo uvedenú, môžete ju overiť lakmusovým papierikom.
- Pri práci sa valčekom nedotýkajte priamo ručnej tyčinky. Pri neopatrnom kontakte prístroj aktivuje automatickú ochranu a odpojí výstup.
- Klientom so silnejšou zrohovatenou vrstvou najprv urobte peeling a potom naneste zavádzanú látku rovnomerne na ošetrovanú oblasť.
- Rôzne látky (dve alebo viac chemikálií) sa nesmú zavádzať súčasne ani za sebou na to isté miesto, bez ohľadu na ich náboj.
- Za bežných okolností je účinok iontoforézy nepriamo úmerný molekulovej hmotnosti zavádzanej látky: čím vyššia molekulová hmotnosť, tým horšie zavádzanie, a čím nižšia molekulová hmotnosť, tým lepšie zavádzanie.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-313B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	4W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Valčeková tyčinka × 2
	Ručná tyčinka × 2
	Napájací kábel × 1

◆ F-314B Vysoká frekvencia (len na kozmetické účely)



1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Štart / Pauza

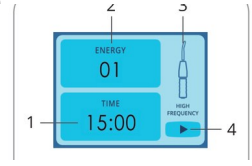

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Stav činnosti
4. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Vysokofrekvenčnú rukoväť zasuňte do príslušného konektora prístroja. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na nepretržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Podľa potreby si môžete zvoliť z viacerých režimov – na rukoväť vysokofrekvenčnej elektroterapie nasaďte vhodnú elektródu.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
5. Ak chcete sondu počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite elektródu 75 % alkoholom a uložte ju na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

1) Mastná pleť: 10 až 15 minút
2) Suchá a dehydrovaná pleť: 3 až 5 minút

Upozornenie: Kovovú časť elektródy nevystavujte kontaktu s vodou


Upozornenia pri používaní F-314B

⚠ Varovanie


- Keď je hlavná jednotka zapnutá, je zakázané dotýkať sa výstupného konektora hlavnej jednotky aj výstupného konektora rukoväte vysokofrekvenčnej elektroterapie.
- Elektródu nemierte priamo na oči ani sa ňou nedotýkajte oblasti očí.
- Výrobok je zakázané používať u týchto osôb a na týchto partiách:
  ① tehotné ženy a osoby s implantovanými prístrojmi (napr. kardiostimulátor);
  ② osoby s cievnymi ochoreniami a vysokou citlivosťou pokožky;
  ③ osoby s kovovými implantátmi alebo kovovými zubnými náhradami v tele;
  ④ osoby s poraneniami pokožky a inými kožnými problémami;
  ⑤ partie so silným ochlpením.
- Nepoužívajte pleťové prípravky s obsahom alkoholu – alkohol je vysoko horľavý. Ak je potrebné tonikum s alkoholom, aplikujte ho až po použití tohto výrobku.
- Počas ošetrenia nedržte rukou miesto spoja vysokofrekvenčnej rukoväte a elektródy – hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Zotrvanie na jednom mieste pokožky nesmie presiahnuť 5 sekúnd.
- Táto funkcia sa nesmie používať na iné ako kozmetické účely.

⚠ Pozor

- Pred použitím skontrolujte, či elektróda alebo kovová hlavica na nej nie je uvoľnená a či elektróda nie je prasknutá alebo poškodená. V takom prípade ju nepoužívajte a ihneď vymeňte.
- Intenzitu postupne znížte na nulu, vypnite prístroj vypínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky skôr, než elektródu nasadíte alebo vyberiete.
- Pri nasadzovaní a vyberaní elektródy si najprv nasaďte gumené rukavice a elektródu držte palcom a ukazovákom: zasuňte ju až na dno otvoru, kým nedrží pevne, a netlačte na ňu dlaňou, aby sklo neprasklo a nespôsobilo poranenie. Je zakázané ťahať za elektródu prudko, aby sa kovová hlavica neodlomila alebo nerozbila a nespôsobila poranenie.

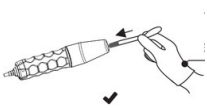

Používajte gumené rukavice, elektródu držte palcom a ukazovákom a zasuňte ju až na doraz.

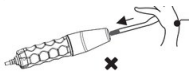


Používajte gumené rukavice, elektródu nezatláčajte dlaňou.

- Pri používaní spôsobuje vysokonapäťový výstup z elektródy rušenie.
- Je zakázané približovať sa s vysokofrekvenčným kozmetickým prístrojom k hlavnej jednotke a k iným elektrickým spotrebičom. Rušenie môže spôsobiť nefunkčnosť alebo poškodenie hlavnej jednotky.
- Keď je elektróda bližšie ako 2,5 cm od pokožky, ale nedotýka sa jej, a iskrenie dráždi pokožku, ihneď znížte intenzitu. Ak klient iskrenie aj naďalej cíti, priložte mu na tvár kúsok suchej bavlnenej utierky (nylonové ani iné syntetické utierky nie sú povolené).
- Počas ošetrenia držte elektródu stále na pokožke klienta. Pri nepriamej vysokofrekvenčnej aplikácii musí byť pri zapínaní a vypínaní prístroja jedna ruka stále v kontakte s pokožkou klienta, nikdy ju neoddiaľujte. Inak obe strany pocítia prúd, ktorý je nepríjemný.
- Po použití najprv vypnite napájanie, potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyberte elektródu z vysokofrekvenčnej rukoväte; elektródu vysterilizujte, nechajte vyschnúť a uložte do boxu na príslušenstvo.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-314B
Napájanie	AC 100V–120V alebo AC 220V–240V, 50/60Hz
Príkon	15W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Rukoväť vysokofrekvenčnej elektroterapie × 1
	Lyžicová elektróda × 1
	Bodová elektróda × 1
	Hranatá elektróda × 1
	Hríbiková elektróda × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-315B Rotačná kefka

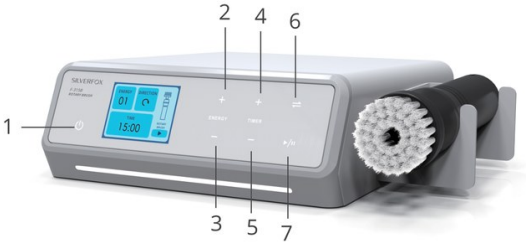

1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

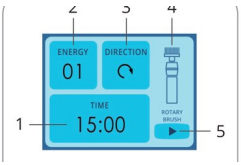

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Smer otáčania
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Rotačnú kefku zasuňte do príslušného konektora prístroja. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na výstupný režim; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Podľa potreby si môžete zvoliť z viacerých režimov – na rukoväť rotačnej kefky nasaďte vhodnú brúsnu hlavicu.
3. Stlačením tlačidla prepínača režimov zvolíte podľa potreby vhodný režim: otáčanie v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
4. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
5. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
6. Ak chcete prístroj počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
7. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite rukoväť rotačnej kefky a brúsnu hlavicu 75 % alkoholom a uložte ich na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

Čas prispôsobte stavu pokožky, zvyčajne ošetrenie nepresahuje 10 minút.

Upozornenia pri používaní

F-315B

⚠ Varovanie

- Nepoužívajte v oblasti pod očami.
- Funkciu kefky je zakázané používať u týchto skupín:
  ① alergickí klienti;
  ② popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky.

⚠ Pozor

- Pred použitím skontrolujte, či je hlavica kefky pevne nasadená na rukoväti.
- Kefku nepoužívajte tak, že držíte samotnú hlavicu kefky.
- Hlavicu kefky nenasadzujte ani nevymieňajte počas používania.
- Nebrzdite otáčanie kefky rukami ani inými predmetmi.
- Funkciu kefky nepoužívajte príliš dlho, aby sa rukoväť kefky neprehriala.
- Pred kontaktom s pokožkou klienta otočte hlavicu kefky nadol. Pri kontakte s pokožkou klienta tlačte jemne, aby to klientovi nebolo nepríjemné.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-315B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	25W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Malá kefka × 1
	Veľká kefka × 1
	Malá pieskovcová brúsna hlavica × 1
	Veľká pieskovcová brúsna hlavica × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-316B Vákuum a sprej



1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

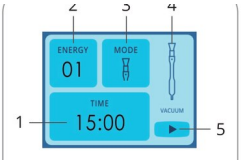

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Voľba režimu
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Vzduchovú hadičku zasuňte do konektora vzduchovej hadičky na hlavnej jednotke. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na výstupný režim; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Stlačením tlačidla prepínača režimov zvolíte podľa potreby vhodný režim: odsávanie (Suction) alebo hydratácia (Hydration). Ak zvolíte režim odsávania, musíte nasadiť vhodnú sklenenú pipetu.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10.
5. Ak chcete prístroj počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite hydratačný nástavec, odsávacie pero a sklenenú pipetu 75 % alkoholom a uložte ich na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

Odsávanie aj hydratácia najviac 10 minút

Upozornenia pri používaní

F-316B

⚠ Varovanie

- Funkciu odsávania nepoužívajte na očiach a v ich okolí.
- Funkcie odsávania a spreja je zakázané používať u týchto osôb:
  ① alergickí klienti;
  ② popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky.


⚠ Pozor

- Ak po zapnutí prístroja nie je cítiť sanie, je to bežný jav. Chvíľu počkajte a sanie sa obnoví.
- Ak rozprašovanie hydratačného nástavca nie je dostatočné, upravte ho regulačným kolieskom na konci nástavca.
- Pred každým použitím skontrolujte, či sklenená pipeta nie je prasknutá alebo rozbitá. V takom prípade ju nepoužívajte a ihneď vymeňte.
- Sklenenou pipetou nezotrvávajte na jednom mieste príliš dlho. Odsávacím perom pohybujte rýchlo, aby nedošlo k poraneniu pokožky.
- Dbajte na to, aby ste trysku nezasunuli do odsávacieho konektora – kozmetický prípravok by sa nasal do vzduchového čerpadla a poškodil hlavnú jednotku.
- Za vzduchovú hadičku neťahajte prudko, aby sa nepoškodila.
- Po použití musí byť prístroj odpojený od napájania.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-316B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	65W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Rukoväť odsávacieho pera × 1
	Sklenená pipeta s plochým ústím × 1
	Sklenená pipeta s okrúhlym ústím × 1
	Sklenená pipeta so špicatým ústím × 1
	Príslušenstvo prístroja × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-317B Rádiofrekvencia (len na kozmetické účely)

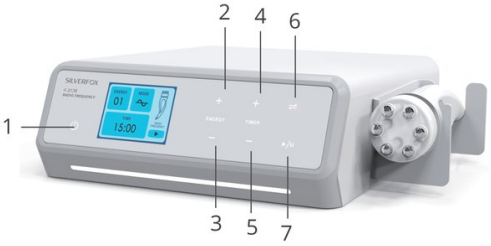

1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

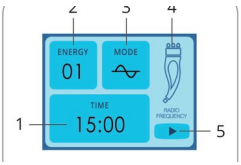

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Voľba režimu sondy
4. Stav činnosti
5. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. RF (rádiofrekvenčnú) sondu zasuňte do konektora hlavnej jednotky. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na nepretržitý vlnový výstup; intenzita na úrovni 1 je nastavená na 15 minút.
2. Stlačením tlačidla prepínača režimov zvolíte podľa potreby vhodný režim.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie RF sondou. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10 tlačidlami „Energy increase/decrease“.
5. Ak chcete prístroj počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite RF sondu 75 % alkoholom a uložte ju na suché miesto.

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Výrobok používajte pri menovitom napätí, ktoré mu zodpovedá, a dbajte na to, aby bola zástrčka úplne zasunutá, inak hrozí zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepoužívajte v kúpeľni ani vo vlhkej miestnosti – hrozí zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nepoužívajte v prostredí s farbami, nátermi, kyslíkom a inými horľavými a výbušnými látkami.
- Ak funkciu nepoužívate, stlačte tlačidlo pauzy.
- Táto funkcia sa nesmie používať u osôb so srdcovým ochorením, cukrovkou, hypertyreózou, zhubným nádorom, ťažkou hypertenziou, kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom, epilepsiou a kožnými ochoreniami vrátane rakoviny kože. Ak výrobok používajú osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne osoby bez skúseností a znalostí (vrátane detí), musí na ne dohliadať zodpovedná osoba a zodpovedať za ich bezpečnosť. Zabráňte deťom, aby s výrobkom manipulovali a hrali sa s ním.
- Výrobok nesmú používať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy počas menštruácie.
- Nepoužívajte na poranených miestach a kĺboch, aby sa nenarušilo hojenie rán.
- Táto funkcia sa nesmie používať na iné ako kozmetické účely.

⚠ Pozor

- Odporúča sa, aby zotrvanie na jednom mieste pokožky nepresiahlo 5 sekúnd, aby nedošlo k popáleniu.
- Pri ošetrení sa sondou vyhýbajte očnej buľve a štítnej žľaze.
- Po ošetrení sondu vydezinfikujte 75 % alkoholom, nechajte dôkladne vyschnúť a uložte.
- Táto funkcia sa neodporúča na miesta, kde boli aplikované umelé výplne, napríklad silikónový gél.
- Pred použitím tejto funkcie sa odporúča odložiť všetky kovové doplnky.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-317B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	60W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Príslušenstvo RF (rádiofrekvenčnej) sondy × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-318B Studené a teplé kladivko



1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Prepínač režimov
7. Štart / Pauza

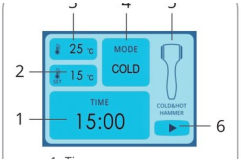

1. Čas
2. Nastavená teplota
3. Aktuálna teplota
4. Voľba režimu sondy
5. Stav činnosti sondy
6. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Studené a teplé kladivko zasuňte do konektora hlavnej jednotky. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na ohrev. Predvolené nastavenie je stabilných 35 °C na 15 minút.
2. Stlačením tlačidla prepínača režimov zvolíte podľa potreby vhodný režim.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie studeným a teplým kladivkom. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10 tlačidlami „Energy increase/decrease“.
5. Ak chcete studené a teplé kladivko počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite studené a teplé kladivko 75 % alkoholom a uložte ho na suché miesto.

Odporúčaný čas aplikácie

Čas prispôsobte ošetrovanej oblasti a stavu pokožky, zvyčajne ošetrenie trvá 10 až 15 minút.

Upozornenia pri používaní

⚠ Varovanie

- Táto funkcia je zakázaná u týchto osôb a na týchto partiách:
  ① klienti s opakovanou vyrážkou v jazve a alergickí klienti;
  ② popáleniny, obareniny, spálenie od slnka, zápal alebo iné poranenia pokožky;
  ③ osoby s imunosupresívnymi ochoreniami so zníženou imunitou alebo osoby užívajúce imunosupresíva;
  ④ operačné rany za posledné 3 mesiace.
- Kozmetička nesmie odísť, kým kladivko pracuje, aby nedošlo k úrazu.

⚠ Pozor

- Studené a teplé kladivko sa smie používať len v interiéri, odporúča sa pri teplote okolo 25 °C. Jeho funkciu ovplyvňuje okolitá teplota – pri príliš vysokej alebo príliš nízkej teplote nemusí dosiahnuť požadovanú pracovnú teplotu a očakávaný účinok.
- Po každom zapnutí kozmetického prístroja a po prepnutí funkcie chladu a tepla chvíľu počkajte, kým kladivko dosiahne nastavenú teplotu. Za bežných okolností trvá nábeh teploty po zapnutí asi 5 minút; pri prepínaní medzi teplom a chladom sa teplota mení asi 3 minúty.
- Pri používaní nezakrývajte vzduchovú štrbinu okolo kladivka, aby v ňom nekondenzovala voda a nedošlo ku skratu.
- Pri ošetrení prikladajte kladivko tesne na pokožku; pri ošetrovaní čela a čelovej kosti tlačte jemne.
- Keď je teplota kladivka vysoká, nezotrvávajte na jednom mieste pokožky.
- Studené a teplé kladivko nepoužívajte ako poklepový nástroj.
- Ak sú na oboch koncoch hlavice kladivka škrabance, pred použitím vymeňte príslušenstvo za nové.
- Neťahajte nadmerne za špirálový kábel kladivka, dbajte na rozsah jeho pohybu.


Parametre výrobku

Model výrobku	F-318B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	35W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Príslušenstvo studeného a teplého kladivka × 1
	Napájací kábel × 1

◆ F-319B Diamantová dermabrázia



1. Vypínač
2. Zvýšenie intenzity +
3. Zníženie intenzity –
4. Predĺženie času +
5. Skrátenie času –
6. Štart / Pauza

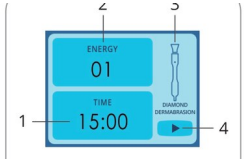

1. Čas
2. Úroveň intenzity
3. Stav činnosti
4. Prevádzkový stav

Postup použitia

1. Odsávacie pero alebo tyčinku zasuňte do konektora hlavnej jednotky. Keď je prístroj správne pripojený k napájaciemu káblu, tlačidlo „Power switch“ svieti načerveno. Stlačením tlačidla „Power Switch“ prejdete do prevádzkového režimu a tlačidlo sa na displeji zobrazí nabielo. Prístroj je štandardne nastavený na úroveň 1 na 15 minút.
2. Zvoľte vhodnú mikrokryštalickú brúsnu hlavicu podľa ošetrovanej oblasti a želaného účinku.
3. Tlačidlami „Time increase/decrease“ nastavíte pracovný čas v rozsahu 1 – 30 minút.
4. Stlačením tlačidla „Start“/„Pause“ spustíte ošetrenie odsávacou tyčinkou. Úroveň intenzity je nastaviteľná od 1 do 10 tlačidlami „Energy increase/decrease“.
5. Ak chcete odsávaciu tyčinku počas ošetrenia zastaviť, stlačte tlačidlo „Pause“.
6. Po ukončení ošetrenia vypnite prístroj tlačidlom „power switch“; tlačidlo sa v tej chvíli rozsvieti načerveno. Po odpojení zástrčky zo zásuvky očistite odsávaciu tyčinku a mikrokryštalickú brúsnu hlavicu 75 % alkoholom a uložte ich na suché miesto.

Upozornenia pri používaní

F-319B

⚠ Varovanie

- Táto funkcia nie je vhodná pre osoby s vysokým krvným tlakom, srdcovým ochorením a cukrovkou.
- Výrobok nesmú používať tehotné ženy, dojčiace ženy a ženy počas menštruácie.
- Použitie je zakázané u osôb s infekčnými ochoreniami a onkologickým ochorením.
- Zakázané je použitie u osôb, ktoré v priebehu posledného roka absolvovali aplikáciu botulotoxínu.
- Osoby s jazvovým tkanivom a nedostatkom kolagénu túto funkciu nesmú používať, inak dôjde k trvalému poškodeniu pokožky.
- Táto funkcia sa nesmie používať na iné ako kozmetické účely.
- Zabráňte tomu, aby sa k výrobku dostali deti a hrali sa s ním – hrozí nebezpečenstvo.

⚠ Pozor

- Pred ošetrením zhodnoťte stav pokožky klienta a zvoľte vhodnú brúsnu hlavicu a primerané sanie.
- Po každom použití je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filter v odsávacej tyčinke.
- Po ošetrení umyte tvár vodou.
- Po ošetrení brúsnu hlavicu vydezinfikujte 75 % alkoholom a uložte ju na suché a vhodné miesto.

Parametre výrobku

Model výrobku	F-319B
Napájanie	AC 100V–240V, 50/60Hz
Príkon	30W
Rozmery výrobku	20.8×23×7.5 cm
Rozmery balenia	37×27.5×14 cm
Obsah balenia	**Hlavná jednotka × 1**
	Polička na príslušenstvo × 1
	Mikrobrúsne príslušenstvo (vrátane 9 druhov mikrobrúsnych hlavíc) **× 1**
	Napájací kábel × 1

Riešenie problémov

Porucha	Príčina	Riešenie
Hlavná jednotka nefunguje alebo sa zasekáva.	1. Bez napájania.	1. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka v poistkovom puzdre napájacieho modulu. Ak je vypálená, vymeňte ju za poistku s rovnakými parametrami. 2. Stlačte tlačidlo štart, po zapnutí sa rozsvieti.
	2. Napájací kábel nie je správne zasunutý alebo pripojený.	2. Napájací kábel správne zasuňte alebo pripojte.
Displej nefunguje.	1. Bez napájania.	1. Zapnite napájanie.
Sonda príslušenstva nefunguje.	1. Zlý kontakt konektora.	1. Odpojte výstupný kábel a znova ho zasuňte do konektora.
Slabý výkon studeného a teplého kladivka, ultrazvuku, špachtle, RF, galvaniky a ďalšieho príslušenstva.	1. Nie je správne nastavený stupeň; 2. Vysoká teplota príslušenstva znižuje výstupný výkon.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Používajte primerane, nenechávajte zapnuté príliš dlho. Keď príslušenstvo nepoužívate, vypnite napájanie.
Dermabrázia má slabé sanie.	1. Nie je správne nastavený stupeň; 2. Dermabrázia je vnútri upchatá; 3. Opotrebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj medzi vzduchovou hadičkou a odsávacím perom je uvoľnený.	1. Nastavte stupeň a upravte regulačný ventil vzduchu; 2. Vymeňte príslušenstvo dermabrázie; 3. Vymeňte vzduchovú hadičku za novú a zasuňte ju do konektora.
Rozprašovač slabo rozprašuje.	1. Nie je správne nastavený stupeň; 2. Hydratačný nástavec je vnútri upchatý; 3. Opotrebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj medzi vzduchovou hadičkou a hydratačným nástavcom je uvoľnený; 5. V nádobke je málo vody.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vymeňte príslušenstvo hydratačného nástavca; 3. Vymeňte vzduchovú hadičku za novú a zasuňte ju do konektora; 4. Sledujte množstvo vody v nádobke a včas ju doplňte.
Odsávacie pero slabo saje.	1. Nie je správne nastavený stupeň; 2. Odsávacia trubica pera je vnútri upchatá; 3. Opotrebovaná vzduchová hadička; 4. Spoj medzi vzduchovou hadičkou a odsávacím perom je uvoľnený.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vymeňte nástavec odsávacieho pera; 3. Vymeňte vzduchovú hadičku za novú a zasuňte ju do konektora.
Slabý výkon vysokofrekvenčnej elektroterapie.	1. Nie je správne nastavený stupeň; 2. Opotrebovanie po dlhodobom používaní elektródy.	1. Nastavte vyšší stupeň; 2. Vymeňte príslušenstvo elektroterapie.
Hlavná jednotka vibruje.	1. Upchaté príslušenstvo.	1. Skontrolujte, či nie je upchatá vzduchová hadička príslušenstva.

Ak sa problém ani po uvedených krokoch nevyrieši, obráťte sa na servisné stredisko alebo dodávateľa.

Fabulo

Dovozca: iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
www.fabulo.sk



Staré alebo nefunkčné spotrebiče nelikvidujte v domovom odpade; odovzdajte ich na verejných zberných miestach.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu výrobku. Tento návod má len informatívny charakter. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.